


Quality products since 1937

Dedeco®

**Italian
Edition**

★ **Made in U.S.A.**







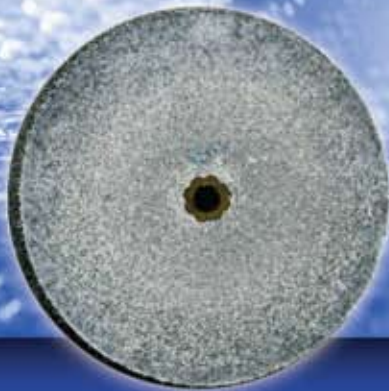


Flossbox[®]

Floss and Mirror in One



STAINO[®]
The Clean Between | Teeth Specialists

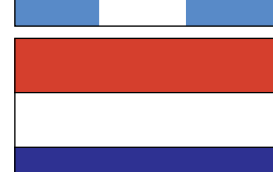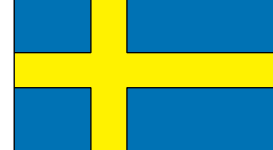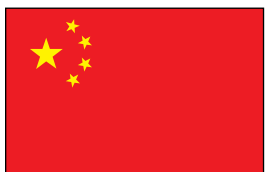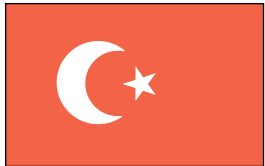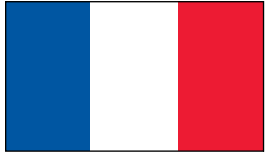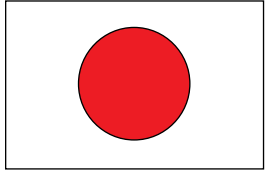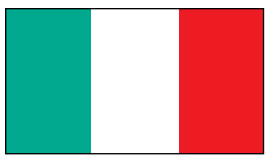

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244
phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281
email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

Ai Nostri Stimati Clienti,

da oltre 70 anni Dedeco ha stabilito gli standard qualitativi per la produzione di abrasivi della migliore qualità per rifinire e lucidare. Superiore manifattura, affidabilità ed innovazione per soddisfare le necessità sempre diverse della nostra clientela sono un contrassegno che ha sempre contraddistinto Dedeco: questa è la tradizione Dedeco.

E' con grande orgoglio che continuiamo questa tradizione pubblicando il nuovo catalogo che annovera i nostri prodotti più innovativi tra cui i dischi ELITE a lunga durata, le frese al tungsteno TSUNAMI Goldies, una gamma completa di gommini in silicone e poliuretano oltre agli abrasivi tradizionali classici che Dedeco produce dal 1937.

Tutti i prodotti Dedeco sono fabbricati nel nostro moderno stabilimento a Long Eddy, New York, dove abbiamo un ampio magazzino in modo da offrire un servizio pronto ed efficiente ai nostri clienti e distributori in tutto il mondo.

Le bandiere che vedete in questa pagina rappresentano solo alcuni dei Paesi in cui sono venduti i nostri prodotti, ma vogliamo esprimere il nostro apprezzamento a tutti i nostri clienti nel mondo per la loro fedeltà ed il continuo supporto.

Cordialmente,

Steven M. Antler, Chairman



Marrone: Lunga durata, rifinisce e lucida metalli non preziosi e semi preziosi. L'unico capace di rifinire o lucidare secondo la pressione utilizzata.

Nero: Duro per rifinire e lucidare cromo cobalto e metalli duri.

Verde: Grana grossa, per rifinire e lucidare i metalli.

Blu: Per un alta glasatura di tutti i metalli.

Rosso flessibile: Soffice per lucidatura oro.

Bianco flessibile: Ultrafine per lucidatura oro e composito.

Ruotine				Lenticolari		Cilindri	Mole		
5/8" x .032" (15·0.8mm)	5/8" x 1/16" (15·1.5mm)	7/8" x .042" (22·1.0mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	4" x 1/2" (101·12.7mm)		
25/box	100/box	25/box	100/box	100/box	100/box	100/box	1/unit		
4988	5988	5030	4989	5989	5010	4982	4983	4595	5419
4995	5995	5020	4990	5990	5000	4941	4940	4590	5420
4996	5996	5021	4991	5991	5001	4951	4950	4592	5421
4997	5997	5024	4992	5992	5004	4961	4960	4593	5422
4998	5998	5027	4993	5993	5007	4971	4970	4594	5415
4999	5999	5029	4994	5994	5009	4981	4980	—	5416

Midgets – HP						Midgets - RA													
3/32" (2.35mm) shanks						3/32" (2.35mm) shanks													
Wheel		Knife		Barrel		14		15		138		14		15		138		Mini	
12/box 72/box		12/box 72/box		12/box 72/box		12/box 72/box		12/box 72/box		12/box 72/box		12/box		12/box		12/box		12/box	
6601 6602		6603 6604		4860 4866		4861 4867		4862 4868		4863 4869		4871		4872		4873		4870	
6605 6606		6607 6608		4360 4336		4361 4345		4362 4368		4363 4369		4371		4372		4373		4370	
6609 6610		6611 6612		4560 4566		4561 4567		4562 4568		4563 4569		4571		4572		4573		4570	
6613 6614		6615 6616		4660 4666		4661 4667		4662 4668		4663 4669		4671		4672		4673		4670	
6617 6618		6619 6620		4364 4359		4365 4350		4366 4353		4367 4356		4375		4376		4377		4374	
6621 6622		6623 6624		4760 4766		4761 4767		4762 4768		4763 4769		4771		4772		4773		4770	

Midgets - FG			Jumbos - HP Confezione da 5 pezzi									
1/16" (1.6mm) shanks			3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm) shanks									
								Assortimento 5 pezzi				
15	138	Mini	A	B	C	D	E	—				
12/box	12/box	12/box	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	
4882	4883	4880	5251 5451	5252 5452	5253 5453	5254 5454	5255 5455	5250 5450				
								Assortimento 5 pezzi				
4382	4383	4380	5261 5461	5262 5462	5263 5463	5264 5464	5265 5465	5260 5460				
								Assortimento 5 pezzi				
4582	4583	4580	5271 5471	5272 5472	5273 5473	5274 5474	5275 5475	5270 5470				
								Assortimento 5 pezzi				
4682	4683	4680	5241 5441	5242 5442	5243 5443	5244 5444	5245 5445	5240 5440				
								Assortimento 5 pezzi				
4386	4387	4384	5281 5481	5282 5482	5283 5483	5284 5484	5285 5485	5280 5480				
								Assortimento 5 pezzi				
4782	4783	4780	5291 5491	5292 5492	5293 5493	5294 5494	5295 5495	5290 5490				

Altri gommini lucidanti classici Confezione da 100 pezzi

Grigio: Medi per cromo cobalto.

Verde - Fine
Multiuso per lucidatura di metalli.

Rosso flessibile - Medio
Per rimozione di crepe e lucidatura di oro.

Verde - Medio
Per una veloce rifinitura di tutti i metalli.

Rosso - Extra Duro
Per rifinire e lucidare il cromocobalto.



15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)
4591	5002	5003	5005	5026	5006	7027	7030

Routine "Super Lucidanti"

Medio (ossido di alluminio) – Per rimuovere velocemente segni di rifinitura ed imperfezioni da ceramica e metalli. Per ortodontisti ideale per grosse rimozioni di compositi ed adesivi.

Fine (carburo di silicio) – Per dentisti ideale per lucidare istantaneamente piccoli ritocchi di ceramica e metalli. Per ortodontisti ideale per piccole rimozioni di compositi ed adesivi.



5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	5/8" x 1/8" (15·3.1mm)	5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	5/8" x 1/8" (15·3.1mm)	5/8" x .032" (15·0.8mm)	7/8" x .042" (22·1.0mm)
25/box	25/box	25/box	25/box	25/box 100/box	25/box 100/box
4931	4930	4933	4932	5042 5046	5043 5047

Gommini lucidanti "Pumice" per Gioielleria

Lunghissima durata! Per rifinire e lucidare oro e metalli semi-preziosi. Ideale per incastonatori – non graffia le pietre.

HP - 3/32" (2.35mm) shanks



Wheel	Knife	Barrel	14	15	138
12/box 72/box	12/box 72/box	12/box 72/box	12/box 72/box	12/box 72/box	12/box 72/box
6519 6529	6520 6530	6521 6531	6522 6532	6523 6533	6524 6534



5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	5/8" x .032" (15·0.8mm)	7/8" x .042" (22·1.0mm)
25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box
6501 6511	6502 6512	6503 6513	6504 6514	6505 6515	6506 6516



Assortimento "Laboratorio" 1010

Questo kit di 139 pezzi contiene gli abrasivi da laboratorio Dedeco più conosciuti, incluse punte montate, ruote abrasive, dischi separatori anche in fibra, taglia perni, routine e cilindri in gomma per rifinire e lucidare tutti i metalli.

Assortimento "Gommini Deluxe" 3500

L'assortimento ideale per rifinire e lucidare metallo e plastica, questo kit di 200 pezzi include Gommini lucidanti classici Dedeco, ruote, lenticolari e cilindri. Include anche mandrini ed una pietra per dare forma ai gommini.

Assortimento "Dentista" 1011

Ideato per soddisfare la domanda di una varietà di abrasivi utilizzati in studio, questo kit di 144 pezzi include un assortimento per rifinire e lucidare tutti i materiali.

"Hi-gloss" gommini diamantati per compositi

NEW

Sistema di lucidatura in 2-passaggi di siliconi diamantati ideato per rifinitura "hi-gloss" di compositi senza paste e senza acqua.

Rosa - Pre-lucidante

RA - 3/32" (2.35mm) shanks				FG - 1/16" (1.6mm) shanks	Snap-On	
Point	Mini	Cup	Knife	Mini	Cup	Midi Point
3/box	3/box	3/box	3/box	3/box	12/box	12/box
1161	1162	1163	1164	1165	1185	1186

**Mandrino
Snap-On**

**RA
3/32" (2.35mm)
shanks**



6/box

5423

Bianco - Finitura "Hi-gloss"

1171	1172	1173	1174	1175	1187	1188

Dedeco

Since 1937

“Hi-glaze” gommini diamantati per ceramica**NEW**

Elimina la
necessità di pasta
lucidante!

Sistema di siliconi diamantati in 3 passaggi per rifinire, lisciare e brillantare la ceramica.

Verde – Riduzione e sgrossatura

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

RA - 3/32" (2.35mm) shanks

FG - 1/16" (1.6mm) shanks

**1" Wheel****1" Knife-Edge****Point****Knife****Wheel****Point****Mini****Cup****Knife****Mini**

1/unit

1/unit

1/unit

1/unit

1/unit

3/box

3/box


3/box

3/box

3/box

1101**1102****1103****1104****1105****1106****1107****1108****1109****1110****Blu – Lisciatura e lucidatura****1121****1122****1123****1124****1125****1126****1127****1128****1129****1130****Giallo – Finitura a specchio****1141****1142****1143****1144****1145****1146****1147****1148****1149****1150****Dedeco**

Since 1937

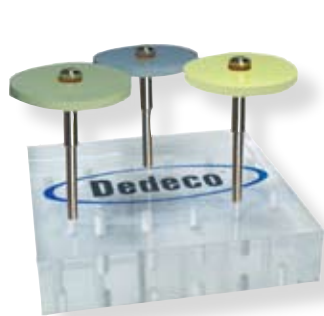Kit di gommini diamantati per brillantatura – HP**NEW**

3-piece kit contains: 1101, 1121, 1141

6-piece kit contains: 1103, 1105, 1123, 1125, 1143, 1145

1180**1181**


“Soffice e flessibile” per alta lucidatura della ceramica. (carburo di silicio)

Bianco • *Grana grossa* - Ideale per sgrassare e lisciare.

Rosa • *Medio* - Per una rifinitura satinata.

Grigio • *Extra-Fine* - Per una brillantatura istantanea.

Ruotine		Lenticolari				Cilindri			
11/16" x 3/32" (17.5·2.4 mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1 mm)		11/16" (17.5 mm)		7/8" (22.2 mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3 mm)	
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box
7501	7502	7503	7504	7507	7508	7509	7510	7511	7512
7551	7552	7553	7554	7557	7558	7559	7560	7561	7562
7601	7602	7603	7604	7607	7608	7609	7610	7611	7612

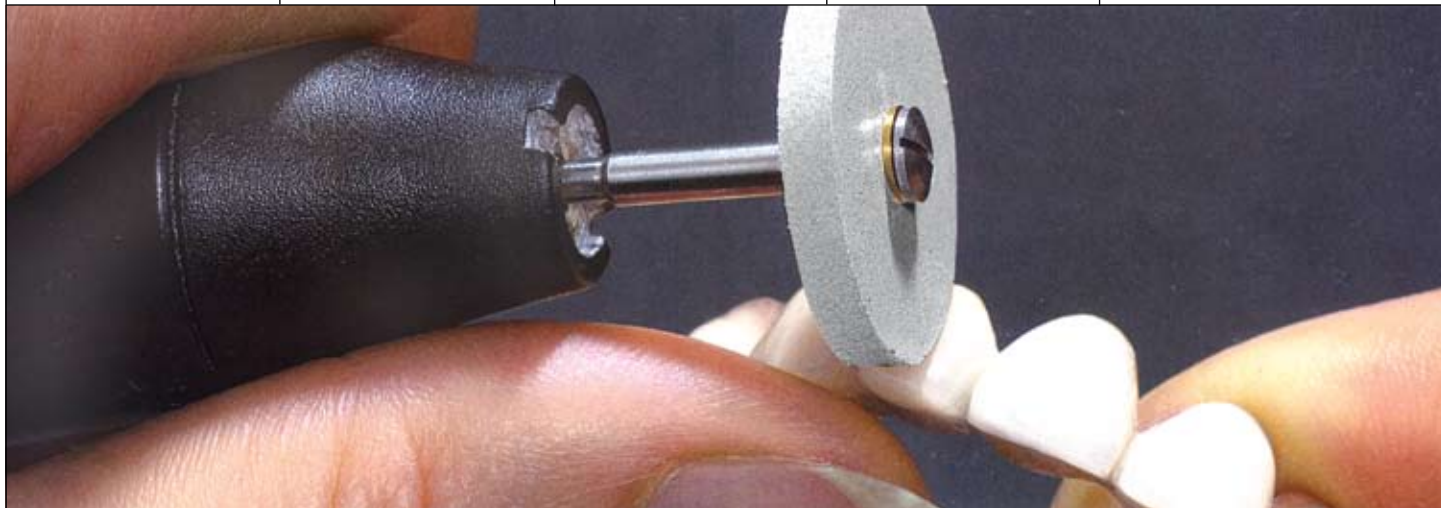



“Soffice e flessibile” per alta lucidatura della ceramica. (carburo di silicio)

- Bianco • *Grana grossa* - Ideale per sgrossare e lisciare.
- Rosa • *Medio* - Per una rifinitura satinata.
- Grigio • *Extra-Fine* - Per una brillantatura istantanea.

Midgets - HP						Midgets - RA					Midgets - FG	
3/32" (2.35mm) shanks						3/32" (2.35mm) shanks					1/16" (1.6mm) shanks	
12 15 138			7 Cup 12 15 138					15 138				
12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box
7531	7532	7533	7534	7535	7536	7540	7541	7542	7543	7544	7546	7547
7581 7582 7583 7584 7585 7586			7590 7591 7592 7593 7594					7596 7597				
7631 7632 7633 7634 7635 7636			7640 7641 7642 7643 7644					7646 7647				



Standard - carburo di silicio: Verde • Grana grossa - Per sgrossare. Grigio • Medio - Per lisciare. Giallo • Fine - Per alta lucidatura.
New - bi-ossido di silicio: Blu Scuro • Grana grossa - Per veloce sgrossatura. Blu Chiaro • Medio - Per veloce lisciatura.

Jumbos - HP

3/32" (2.35mm) shanks



Assortimento
5 pezzi

A

C

D

E

F

—

5/box

5/box

5/box

5/box

5/box

5/kit

7701

7703

7704

7705

7706

7700



Assortimento
5 pezzi

7711

7713

7714

7715

7716

7710



Assortimento
5 pezzi

7721

7723

7724

7725

7726

7720



Assortimento
5 pezzi

7731

7733

7734

7735

7736

7730



Assortimento
5 pezzi

7741

7743

7744

7745

7746

7740

Kit rifinitura e lucidatura acrilico Kit da 8 pezzi

NEW



Per veloce sgrossatura, rifinitura e lucidatura di acrilico in studio. Da effetto brillantante.

8-piece kit contains: 7705, 7706, 7715, 7716, 7725, 7726, 9353, 9372

7750



Punte montate abrasive per acrilico – HP

Punte montate tradizionali per sgrossatura veloce di acrilici e ribasature morbide.

3/32" (2.35mm) shanks



**Grana
grossa**

Assortimento
5 pezzi

1	2	4	5	113	—
5/box	5/box	5/box	5/box	5/box	5/kit
6101	6102	6104	6105	6106	6100



Medio

Assortimento
5 pezzi

5101	5102	5104	5105	5106	5100
------	------	------	------	------	------

Gommini per sgrossare acrilico – HP

Grana grossa - Ideate per una veloce sgrossatura senza impastarsi di base-plate e protesi in acrilico. Stessa composizione delle ruote per sgrossare acrilico.



3/32" (2.35mm) shanks

Assortimento
5 pezzi

A	B	C	D	E	—
5/box	5/box	5/box	5/box	5/box	5/kit
5231	5232	5233	5234	5235	5230

Ruote abrasive

Ruote per sgrossare acrilico

Punte Touch-Up

Grana grossa - Ruote abrasive con legante resinoso non riscaldanti, senza impastarsi per sgrossatura di base-plate e protesi in acrilico. Stessa composizione degli sgrossatori rossi per acrilico.



7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)	
25/box	100/box
5111	5113

Grana grossa - Ruote abrasive con legante gommoso, senza impastarsi, ideali per una veloce sgrossatura di base-plate e protesi in acrilico.



7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)	
25/box	100/box
5110	5112

Per piccole sgrossature, ritocchi e lucidatura di acrilici alla poltrona in meno di un minuto. Usare il manipolo con una normale pressione per rimuovere gli eccessi o lisciare una zona già rifinita. Impregnare di burro di cacao o vaselina, ed usare una leggera pressione per dare un lustro tipo glasatura.

HP - 3/32" (2.35mm) shanks



12/box
5114

Gamma completa per rifinire e lucidare tutti i metalli.

- Cromo** • *Grana Extra-grossa* - Per rifinire e lucidare metalli non preziosi.
- Blu** • *Grana grossa* - Per ritoccare cromo cobalto, leghe in acciaio e non preziose.
- Grigio** • *Medio* - Per lisciare leghe preziose e non preziose.
- Marrone** • *Fine* - Per rifinitura opaca di oro e metalli non preziosi.
- Verde** • *Extra-fine* - Per una lucidatura brillante di oro e metalli non preziosi.

Ruotine		Lenticolari		Cilindri		Pins	
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2·20mm)		1/8" x 7/8" (3·23mm)					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box
7301	7302	7305	7306	7309	7310	7311	7312
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2·20mm)		1/8" x 7/8" (3·23mm)					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box
7801	7802	7805	7806	7809	7810	7811	7812
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2·20mm)		1/8" x 7/8" (3·23mm)					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box
7351	7352	7355	7356	7359	7360	7361	7362
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2·20mm)		1/8" x 7/8" (3·23mm)					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box
7401	7402	7405	7406	7409	7410	7411	7412
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2·20mm)		1/8" x 7/8" (3·23mm)					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box
7451	7452	7455	7456	7459	7460	7461	7462

Gamma completa per rifinire e lucidare tutti i metalli.

- Cromo** • *Grana Extra-grossa* - Per rifinire e lucidare metalli non preziosi.
- Blu** • *Grana grossa* - Per ritoccare cromo cobalto, leghe in acciaio e non preziose.
- Grigio** • *Medio* - Per lisciare leghe preziose e non preziose.
- Marrone** • *Fine* - Per rifinitura opaca di oro e metalli non preziosi.
- Verde** • *Extra-fine* - Per una lucidatura brillante di oro e metalli non preziosi.

Midgets - HP

3/32" (2.35mm) shanks

Wheel		Knife		12		14		15		138													
12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	72/box												
7323	7324	7325	7326	7331	7332	7333	7334	7335	7336	7337	7338												
7823		7824		7825		7826		7831		7832		7833		7834		7835		7836		7837		7838	
7373		7374		7375		7376		7381		7382		7383		7384		7385		7386		7387		7388	
7423		7424		7425		7426		7431		7432		7433		7434		7435		7436		7437		7438	
7473		7474		7475		7476		7481		7482		7483		7484		7485		7486		7487		7488	



- Cromo** • *Grana Extra Grossa* – Per rifinire e lucidare metalli non preziosi.
- Blu** • *Grana Grossa* – Per ridurre cromo cobalto, acciaio inossidabile e leghe non preziose.
- Grigio** • *Medio* – Per lisciare leghe preziose e non preziose.
- Marrone** • *Fine* – Per rifinitura opaca di oro e metalli non preziosi.
- Verde** • *Extra-fine* – Per lucidatura altamente brillante di oro e metalli non preziosi.

Midgets - RA					Midgets - FG				Jumbos - HP
3/32" (2.35mm) shanks					1/16" (1.6mm) shanks				3/32" (2.35mm) shanks
7	Cup	15	138	Mini	Cup	15	138	Mini	G
12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	12/box	5/box
7339	7341	7342	7343	7344	7345	7346	7347	7348	7340
7839	7841	7842	7843	7844	7845	7846	7847	7848	7840
7389	7391	7392	7393	7394	7395	7396	7397	7398	7390
7439	7441	7442	7443	7444	7445	7446	7447	7448	7440
7489	7491	7492	7493	7494	7495	7496	7497	7498	7490


















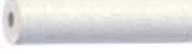

Grigio • Ultra-soft – Siliconi flessibili per lisciare and lucidare oro e tutti i metalli.

Pumice • Medio – Per incastonatori di gioielli; non graffiano pietre preziose e sintetiche. (silicone)

Pumice • Fine – Per incastonatori di gioielli; non graffiano pietre preziose e sintetiche. (silicone)

Miracle Gold • Ultra-fine – Il meglio in assoluto dei siliconi auto-lucidanti per la lucidatura finale di oro. Elimina la necessità di paste per lucidatura.

Bianco Flessibile • I tradizionali ideali per porcellana e oro – oggi disponibili in poliuretano.

	Ruotine	Lenticolari	Cilindri	Midgets - HP	
Grigio - Ultra-soft				3/32" (2.35mm) shanks —	
	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15 —	
	12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 72/box	
	7901 7902	7903 7904	7905 7906	— —	
Pumice - Medio					
	7911 7912	7913 7914	7915 7916	7917 7918	
	Pumice - Fine				
		7921 7922	7923 7924	7925 7926	7927 7928
Miracle Gold					
		6561 6562	6563 6564	6567 6568	6569 6570
	Bianco Flessibile				
		7951 7952	7953 7954	7955 7956	7957 7958

"Soffice e flessibile" per leghe preziose.

- Bianco** • *Grana grossa* – Per rifinitura e rimozione di crepe.
- Nero** • *Medio* – Per lisciare.
- Blu** • *Fine* – Per una lucidatura brillante.
- Rosa** • *Extra-fine* – Per una lucidatura super brillante.

Ruotine						Lenticolari				Pins		Coppette															
11/16" x 3/32" (17.5·2.4mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" x 1/4" (22·6.3mm)		11/16" (17.5mm)		7/8" (22.2mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)	1/2" x 1/4" (11·6mm)															
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box	12/box	100/box														
7101	7102	7103	7104	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7116	7118	7119	7120														
7151		7152		7153		7154		7155		7156		7157		7158		7159		7160		7166		7168		7169		7170	
7201		7202		7203		7204		7205		7206		7207		7208		7209		7210		7216		7218		7219		7220	
7251		7252		7253		7254		7255		7256		7257		7258		7259		7260		7266		7268		7269		7270	

"Soffice e flessibile" per leghe preziose.

Bianco • *Grana grossa* – Per rifinitura e rimozione di crepe.

Nero • *Medio* – Per lisciare.










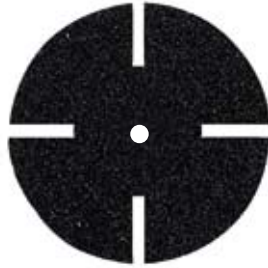










Blu • *Fine* – Per una lucidatura brillante.

Rosa • *Extra-fine* – Per una lucidatura super brillante.

Cilindri				Midgets - HP								Jumbos - HP				
				3/32" (2.35mm) shanks								3/32" (2.35mm) shanks				
15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 3/8" (24·9.5mm)	15/16" x 1/2" (24·12.7mm)	12 —		14 —		15 —		138 —		G —				
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	72/box	12/box	72/box	12/box	72/box	5/box		
7111	7112	7113	7114	7121	7122	7123	7124	7131	7132	7133	7134	7135	7136	7137	7138	7140
7161	7162	7163	7164	7171	7172	7173	7174	7181	7182	7183	7184	7185	7186	7187	7188	7190
7211	7212	7213	7214	7221	7222	7223	7224	7231	7232	7233	7234	7235	7236	7237	7238	7240
7261	7262	7263	7264	7271	7272	7273	7274	7281	7282	7283	7284	7285	7286	7287	7288	7290

"Soffice e flessibile" per leghe preziose.

- Bianco** • *Grana grossa* – Per rifinitura e rimozione di crepe.
- Nero** • *Medio* – Per lisciare.
- Blu** • *Fine* – Per una lucidatura brillante.
- Rosa** • *Extra-fine* – Per una lucidatura super brillante.

Ring Buffs			Mole	Split Laps
				
3" x 3/8"-5/8" (76·9.5-15.8mm)	3" x 3/8"-3/4" (76·9.5-19.1mm)	4" x 5/8" - 15/16" (101·15.8-24mm)	4" x 1/2" (101·12.7mm)	6" (152.4mm)
7961	7962	7963	7100	7964
				
7965	7966	7967	7150	7968
				
7969	7970	7971	7200	7972
				
7973	7974	7975	7250	7976

In risposta a numerose richieste, abbiamo il piacere di aggiungere questi nuovi assortimenti di gommini alla nostra gamma.



Il leader da industria a industria



Assortimento Gommini lucidanti in Poliuretano: Pin 2mm	51/kit	7851
Assortimento Gommini lucidanti in Poliuretano: Pin 3mm	51/kit	7852
Assortimento Midgets Classici	24/kit	4333
Assortimento Midgets in Poliuretano	24/kit	7853
Assortimento Midgets in Silicone Universali	24/kit	7854
Assortimento Lucidanti Pomice per Gioielleria	31/kit	7855
Assortimento Gommini in Poliuretano per Lucidare Metalli	84/kit	7856

Rivoluzionario — Rivestimento in Nitruro di Titanio L'ultimo ritrovato nella tecnologia degli abrasivi

- ★ Garantisce una durata di tre volte superiore rispetto agli strumenti tradizionali
- ★ Permette una rifinitura a freddo più rapida e più liscia di tutti i materiali

Le frese al tungsteno **Goldies®** - una combinazione tra la migliore qualità del tungsteno ed una coltre permanente di 0,0001" di nitruro di titanio dorato - sono l'ultimo ritrovato nella tecnologia degli abrasivi.


Questo rivestimento di nitruro di titanio dà alle frese una durata ed un rendimento molto elevato essendo la superficie del tungsteno molto più dura. In particolare le lame delle frese restano più affilate per un periodo di tempo più lungo. Questo rivestimento funge da lubrificante e le frese più affilate danno una rifinitura più liscia anche a più alte velocità di lavoro.

Frequentemente con frese non rivestite dei frammenti possono aderire alla fresa ed incastrarsi nella stessa impedendo così una rifinitura sufficientemente liscia. I detriti creati dalle frese rivestite in nitruro di titanio hanno una tendenza minore ad aderire allo strumento. Il taglio sottile e la scorrevolezza dei detriti sulla superficie contribuiscono entrambi ad una miglior rifinitura.

Qualsiasi materiale che è stato lavorato sinora con frese tradizionali potrà oggi essere trattato con risultati migliori con le frese **Goldies®**.


Sgrossatura e rifinitura composito - FG Confezione da 1 pezzo

12 lame per una veloce sgrassatura e rifinitura del composito; adatte anche per ceramica, acrilico e amalgama.

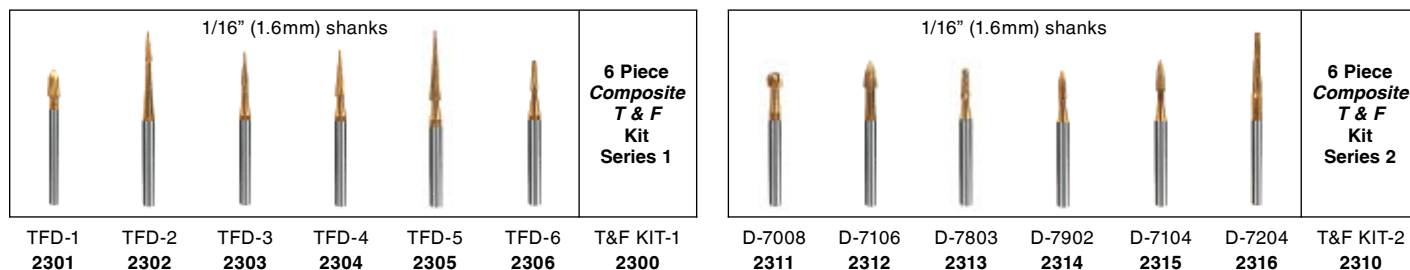


Taglio e rifinitura di metalli - FG Confezione da 1 pezzo

Per una veloce sgrassatura e rifinitura di amalgama oro e metalli non preziosi.

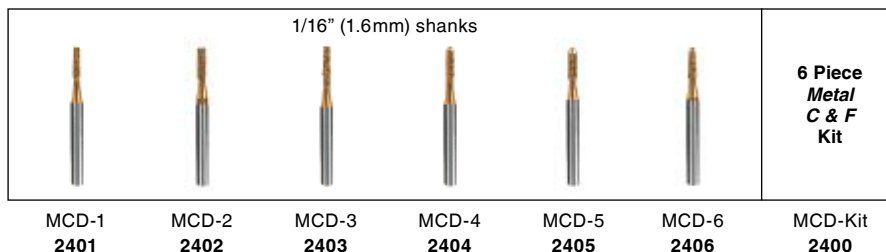


Fresoni per pulitrice Confezione da 1 pezzo

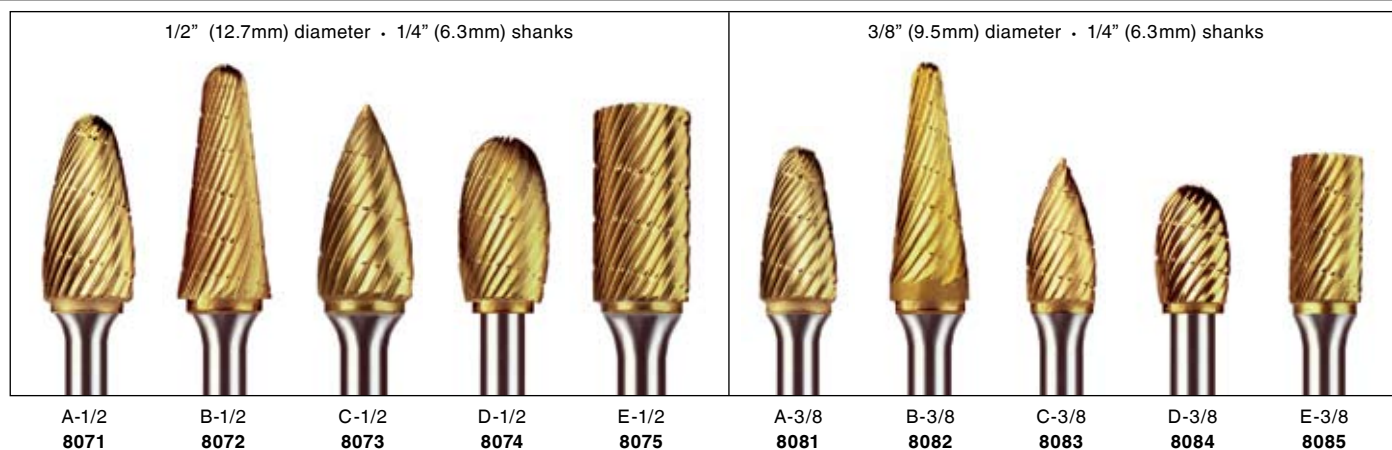

3/32" (2.35mm) shanks


Taglio Diamante

Per una "fine" rifinitura di acrilico, composito e porcellana. Ideale per sgrossatura e rifinitura finale in aree "difficili da raggiungere".

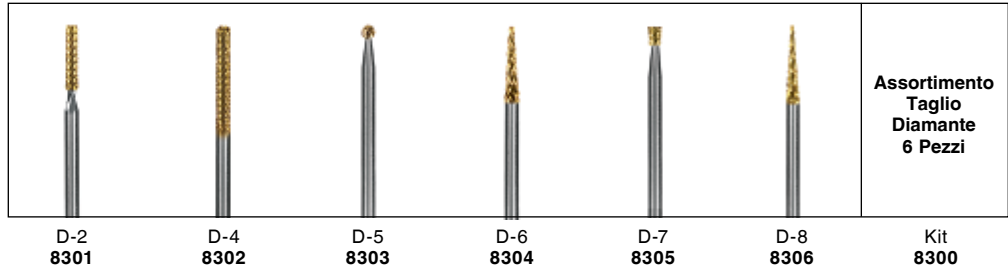


Taglio Grana grossa

"Il più rapido" per ridurre acrilico e tutti i metalli, inclusi non-preziosi e cromo cobalto.

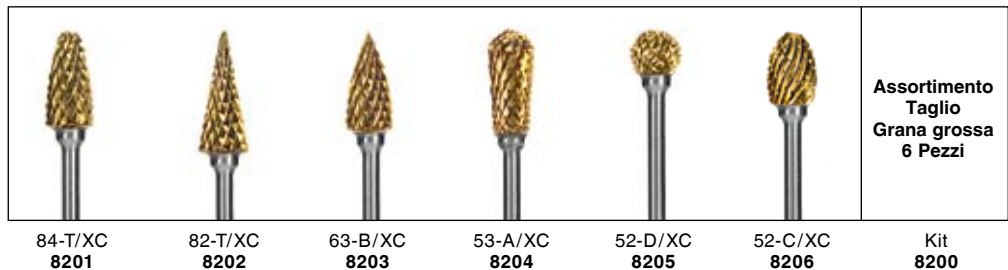

Taglio Fine

Per ritoccare "alla poltrona" acrilico e metalli - lascia lisce le superfici rifinite.

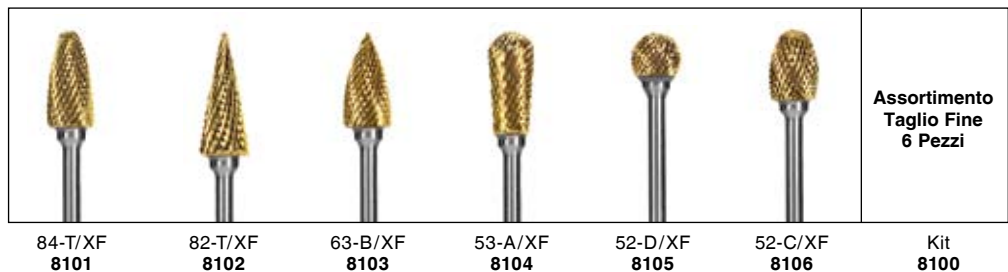

Taglio Standard

"Standard" per rifinitura di acrilici e metalli.



Taglio Speciale

Per grosse rimozioni di acrilico e gesso, senza impastarsi.



Serie 47

Forma internazionale. Disponibile Taglio Fine e Grosso.





Lunga durata - Rivestimento in Nitruro di Titanio

- ★ **Forme di maggiore utilizzo**
- ★ **Lavorazione e bilanciamento di precisione**
- ★ **Codifica per colore secondo standards ISO**


Taglio Incrociato Regular: [E]

Taglio incrociato ideale per taglio rapido di metallo, gesso e acrilico.

3/32" (2.35mm) shanks




G071E 023 8310	G071E 027 8311	G071E 040 8351	G071E 050 8312	G072E 060 8313	G077E 029 8352	G077E 060 8353	G078E 040 8354	G079E 031 8355	G079E 040 8314
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

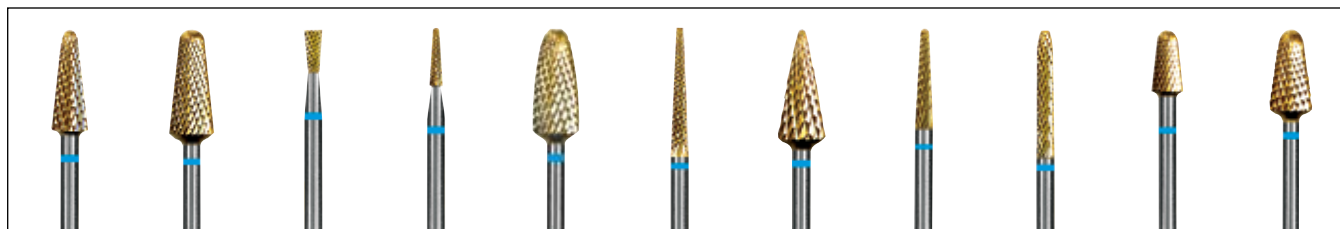

G079E 045 8356	G079E 060 8357	G137E 023 8315	G138E 016 8358	G251E 060L 8359	G257E 023 8360	G257RE 060 8361	G261E 023 8362	G295E 023 8363	G351E 040 8364	G351E 060 8316
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Taglio Incrociato Fine: [EF]


Taglio incrociato fine ideale per taglio rapido di metallo, gesso e acrilico.

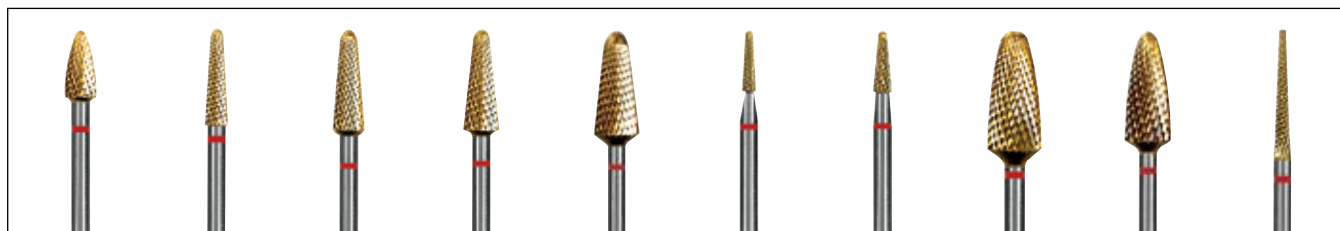

G078EF 040 8317	G079EF 031 8318	G079EF 040 8319	G079EF 045 8370	G079EF 060 8320	G138EF 016 8371	G138EF 023 8321	G251EF 060 8322	G251EF 060L 8372	G257EF 023 8323
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Taglio Incrociato Fine: [EF]

Taglio incrociato fine ideale per taglio rapido di metallo, gesso e acrilico.

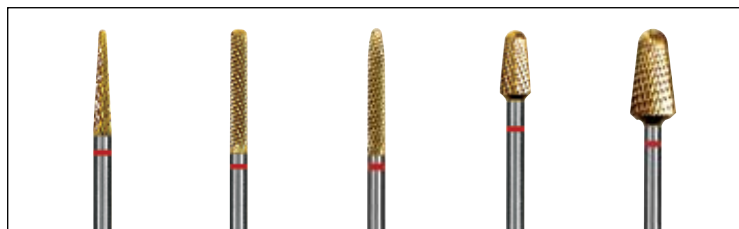

G261EF 023 8373	G293EF 023 8324	G295EF 023 8325	G351EF 040 8326	G351EF 060 8374
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Taglio Fine a Spirale: [SPF]

Taglio fine a spirale ideale per sgrassare tutti gli acrilici soffici. Effetto "Rasatura" sul metallo.



G79SPF 040 8375	G129SPF 023 8376	G251SPF 060 8377
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3/32" (2.35mm) shanks

Taglio Incrociato Orizzontale Fine: [FST]

Taglio incrociato orizzontale fine ideali per sgrossare per materiali soffici per ribasatura e paradenti. A 15,000 rpm, sono ideali per il titanio.



G079FST 040 8327 G129FST 023 8328 G136FST 016 8329 G138FST 023 8330 G139FST 023 8331 G251FST 060 8332 G390FST 014 8333

Taglio Super Grosso: [XG]

Per una rapida riduzione di acrilico, gesso e materiali soffici per ribasatura.



G251XG 060 8334 G351XG 070 8369

Taglio Incrociato Superfine: [SF]

Per la tessitura della porcellana, struttura in metallo e provvisori in acrilico.



G079SF 045 8365 G257SF 023 8366 G261SF 023 8335 G293SF 023 8336 G295SF 023 8337

Taglio Incrociato Grosso a lama dritta: [GSQ]


Eccellente per sgrossare materiali soffici per ribasatura.



G077GSQ 040 8338 G251GSQ 060 8339 G261GSQ 023 8340

Taglio Incrociato Grosso: [SG]


Taglio ampio ideale per sgrossare rapidamente gesso ed acrilico.

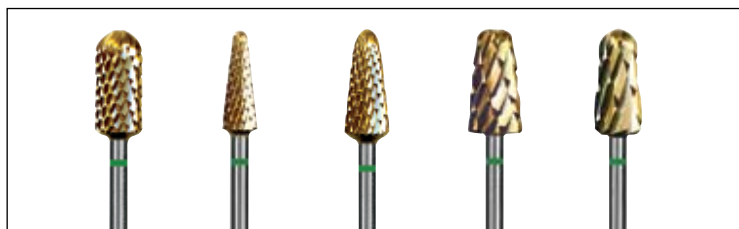

G072SG 060 8341 G079SG 045 8342 G079SG 060 8343 G251SG 060 8367 G351SG 060 8368

Dentellatura Grossa Titanio: [GTi]


Questa dentellatura speciale consente un taglio più aggressivo.

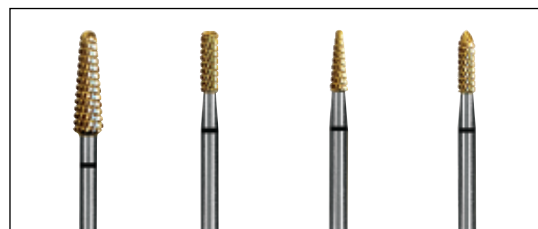

G079GTi 040 8344 G129GTi 023 8345 G138GTi 023 8346 G139GTi 023 8347

Taglio Incrociato Molto Grosso: [GE]


Per una veloce riduzione di acrilico e gesso.

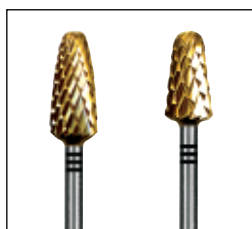

G251GE 060 8348 G351GE 060 8349

Vacuum Form

Ideale per base-plate, splintaggi e tray per sbiancamento.

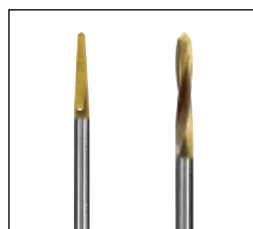

G219 023 8378 G219S 023 8379

Kit 6 - Pezzi 8350

Per rifinire metallo, acrilico e gesso. Include un porta-frese in plexiglass.



G251E 060L 8359 G261E 023 8362 G351SG 060 8368 G351XG 070 8369 G251EF 060L 8372 G251SPF 060 8377

Fresoni in tungsteno di lunga durata con rivestimento in Nitruro di Titanio Per modellare e tagliare velocemente gesso, monconi in gesso, resina epossidica e acrilico. Non si impastano.

Grana grossa

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

3/4" (19.1mm) inside diameters



Round 8461 Long Taper 8462 Taper 8463 Cylinder 8464 Ball Nose 8465 Roto Saw 8466 Flame 8467 Bud 8468

1/2" Sleeve 8481 1" Sleeve 8482

Fine



8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458

8471 8472

Goldies[®] Frese al Tungsteno

- ★ Utilizzabile con tutti i sistemi più diffusi per la fabbricazione di monconi sfilabili
- ★ Durata minima garantita di 3 volte rispetto alle normali frese
- ★ Accuratezza superiore
- ★ Operatività migliore e senza riscaldamento



shank 3mm • head length 6mm • total length 34.5mm
8500

Fresoni per pulitrici

Confezione da 1 pezzo

La stessa qualità "Top" utilizzata per produrre le frese in Tungsteno **Goldies[®]** è disponibile non rivestita di nitruro di titanio.

1/2" (12.7mm) diameter • 1/4" (6.3mm) shanks

3/8" (9.5mm) diameter • 1/4" (6.3mm) shanks




A-1/2 9071 B-1/2 9072 C-1/2 9073 D-1/2 9074 E-1/2 9075

A-3/8 9081 B-3/8 9082 C-3/8 9083 D-3/8 9084 E-3/8 9085

3/32" (2.35mm) shanks


Taglio Diamante

Per una "fine" rifinitura di acrilico, composito e porcellana. Ideale per sgrossatura e rifinitura finale in aree "difficili da raggiungere".

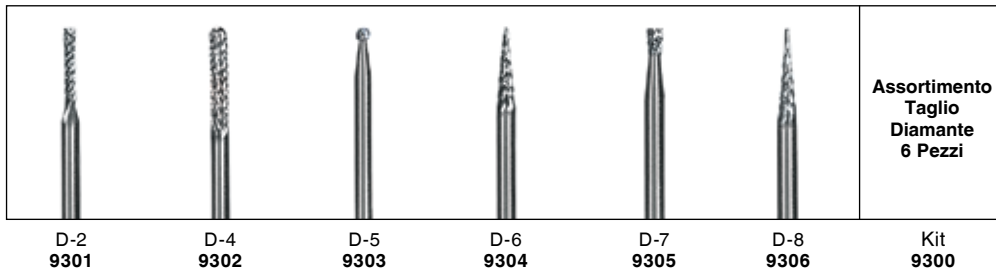


Taglio Grana grossa

"Il più rapido" per ridurre acrilico e tutti i metalli, inclusi non-preziosi e cromo cobalto.

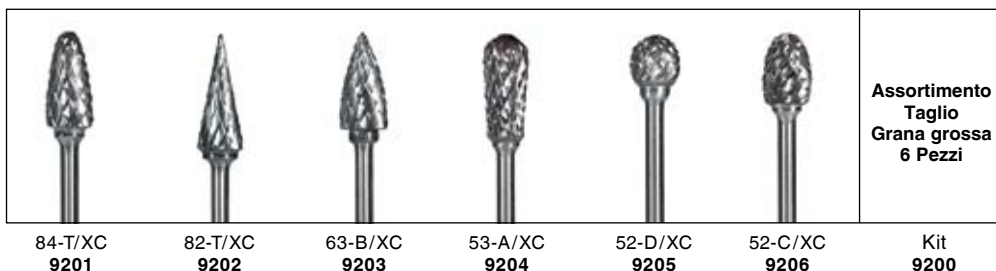


Taglio Fine

Per ritoccare "alla poltrona" acrilico e metalli - lascia lisce le superfici rifinite.

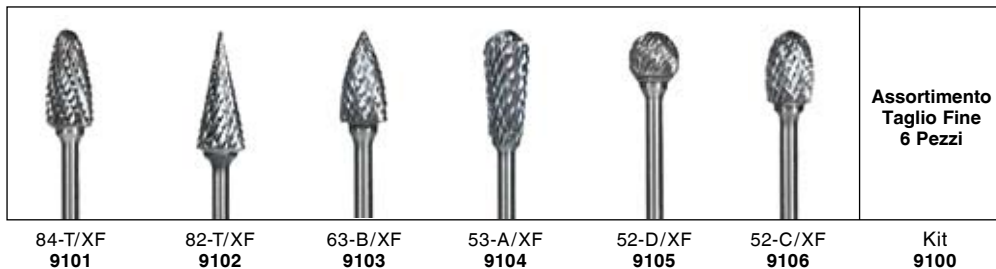

Taglio Standard

"Standard" per rifinitura di acrilici e metalli.

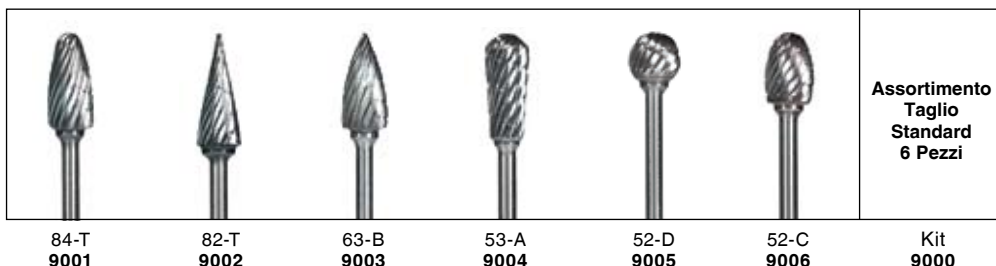

51-A 9012 61-A/81-A 9013 73-C 9014 88-A 9015 83-E 9016 41-P 9051 44-C 9052 31-P 9061 32-P 9062 33-C 9063 71-G 9064

Taglio Speciale

Per grosse rimozioni di acrilico e gesso, senza impastarsi.



84-T/SP 9091 88-A/SP 9092

Serie 47

Forma internazionale. Disponibile Taglio Fine e Grosso.



47-XF 9010 47-XC 9011

La stessa qualità "Top" utilizzata per produrre le frese Euro **Goldies®** è disponibile non rivestita di nitruro di titanio

- ★ **Forme di maggiore utilizzo**
- ★ **Lavorazione e bilanciamento di precisione**
- ★ **Codifica per colore secondo standards ISO**


Taglio Incrociato Regular: [E]

Taglio incrociato ideale per taglio rapido di metallo, gesso e acrilico.

3/32" (2.35mm) shanks



D071E 023 9310	D071E 027 9311	D071E 040 9351	D071E 050 9312	D072E 060 9313	D077E 029 9352	D077E 060 9353	D078E 040 9354	D079E 031 9355	D079E 040 9314
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

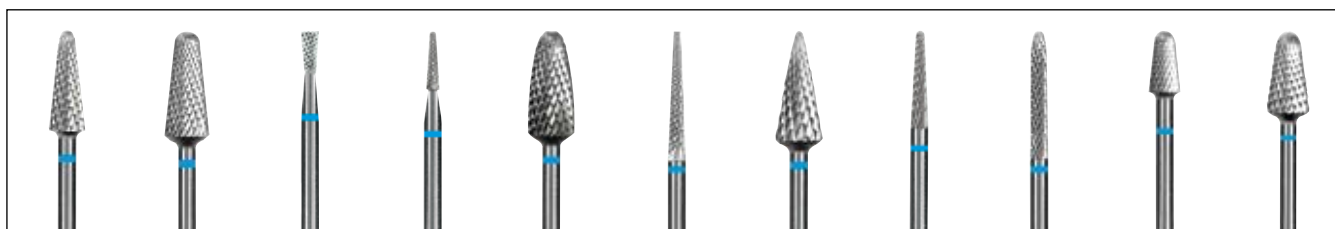

D079E 045 9356	D079E 060 9357	D137E 023 9315	D138E 016 9358	D251E 060L 9359	D257E 023 9360	D257RE 060 9361	D261E 023 9362	D295E 023 9363	D351E 040 9364	D351E 060 9316
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Taglio Incrociato Fine: [EF]

Taglio incrociato fine ideale per taglio rapido di metallo, gesso e acrilico.



D078EF 040 9317	D079EF 031 9318	D079EF 040 9319	D079EF 045 9370	D079EF 060 9320	D138EF 016 9371	D138EF 023 9321	D251EF 060 9322	D251EF 060L 9372	D257EF 023 9323
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Taglio Incrociato Fine: [EF]

Taglio incrociato fine ideale per taglio rapido di metallo, gesso e acrilico.



D261EF 023 9373	D293EF 023 9324	D295EF 023 9325	D351EF 040 9326	D351EF 060 9374
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Taglio Fine a Spirale: [SPF]

Taglio fine a spirale ideale per sgrassare tutti gli acrilici soffici. Effetto "Rasatura" sul metallo.



D79SPF 040 9375	D129SPF 023 9376	D251SPF 060 9377
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3/32" (2.35mm) shanks

Taglio Incrociato Orizzontale Fine: [FST]

Taglio incrociato orizzontale fine ideali per sgrossare per materiali soffici per ribasatura e paradenti. A 15,000 rpm, sono ideali per il titanio.



D079FST 040 9327	D129FST 023 9328	D136FST 016 9329	D138FST 023 9330	D139FST 023 9331	D251FST 060 9332	D390FST 014 9333
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Taglio Super Grosso: [XG]


Per una rapida riduzione di acrilico, gesso e materiali soffici per ribasatura.



D251XG 060 9334	D351XG 070 9369
-----------------------	-----------------------

Taglio Incrociato Superfine: [SF]


Per la tessitura della porcellana, struttura in metallo e provvisori in acrilico.

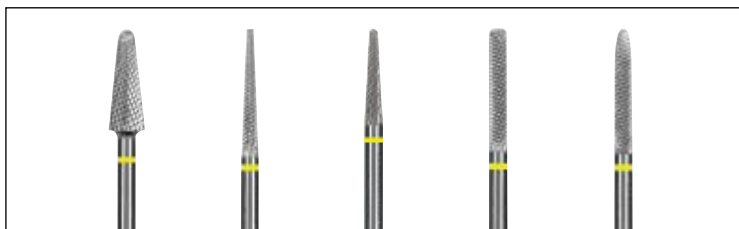

D079SF 045 9365	D257SF 023 9366	D261SF 023 9335	D293SF 023 9336	D295SF 023 9337
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Taglio Incrociato Grosso a lama dritta: [GSQ]

Eccellente per sgrossare materiali soffici per ribasatura.

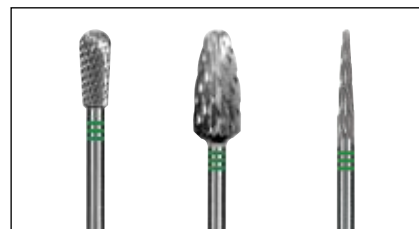

D077GSQ 040 9338	D251GSQ 060 9339	D261GSQ 023 9340
------------------------	------------------------	------------------------

Taglio Incrociato Grosso: [SG]


Taglio ampio ideale per sgrossare rapidamente gesso ed acrilico.



D072SG 060 9341	D079SG 045 9342	D079SG 060 9343	D251SG 060 9367	D351SG 060 9368
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Dentellatura Grossa Titanio: [GTi]

Questa dentellatura speciale consente un taglio più aggressivo.

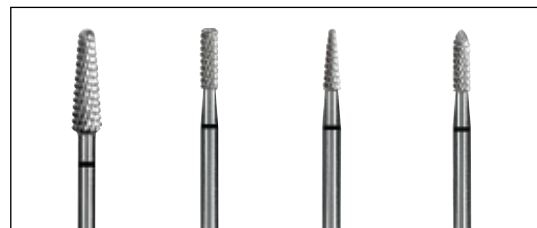

D079GTi 040 9344	D129GTi 023 9345	D138GTi 023 9346	D139GTi 023 9347
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Taglio Incrociato Molto Grosso: [GE]


Per una veloce riduzione di acrilico e gesso.



D251GE 060 9348	D351GE 060 9349
-----------------------	-----------------------

Vacuum Form


Ideale per base-plate, splintaggi e tray per sbiancamento.

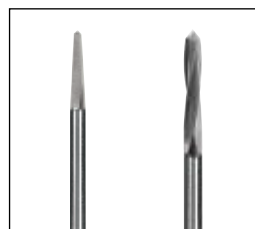

D219 023 9378	D219S 023 9379
---------------------	----------------------

Kit 6 - Pezzi 9350

Per rifinire metallo, acrilico e gesso. Include un porta-frese in plexiglass.

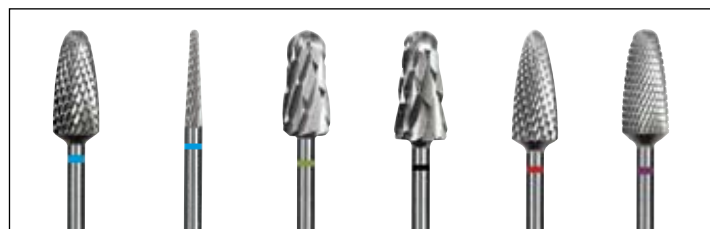

D251E 060L 9359	D261E 023 9362	D351SG 060 9368	D351XG 070 9369	D251EF 060L 9372	D251SPF 060 9377
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------















Rivoluzionario — Rivestimento in Nitruro di Titanio
L'ultimo ritrovato nella tecnologia degli abrasivi

- ★ Garantisce una durata di tre volte superiore rispetto agli strumenti tradizionali
- ★ Permette una rifinitura a freddo più rapida e più liscia di tutti i materiali

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

Goldies[®]

Durano 3 volte di più!

	Number MM Inches	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1 0.9 .035	2 1.1 .043	3 1.3 .051	4 1.5 .059	5 1.7 .067	6 1.9 .075	7 2.1 .083	8 2.3 .090	9 2.5 .098	10 2.7 .106	11 2.9 .114	12 3.1 .122	13 3.3 .130	14 3.5 .138
SLIM REAMER 										0384				0419	
CONE REAMER 															
INVERTED CONE 					0350			0351					0423		
CYLINDER 					0356			0357					0427		
TREE 					0352			0353					0424		
ROUND EDGE WHEEL 					0358			0359					0429		
SQUARE EDGE WHEEL 					0354			0355					0425		
FLAME 		0346		0347		0348		0349		0385		0386		0420	
SETTING 	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0380	0381	0382	0383	0413	0414	0415
45° BEARING CUTTER 		0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0376	0377	0378	0379	0407	0408	0409
90° BEARING CUTTER 	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0372	0373	0374	0375	0401	0402	0403
CONE 		0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0368	0369	0370	0371	0397	0398	
BUD 		0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0364	0365	0366	0367	0393	0394	
ROUND 	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0360	0361	0362	0363	0387	0388	0389








La procedura di fabbricazione utilizzata consiste in una vaporizzazione sottovuoto ad altissima temperatura che permette al Nitrato di titanio gassoso di aderire alla superficie tagliente rendendo così lo strumento praticamente indistruttibile. Qualsiasi materiale che è stato lavorato sinora con frese tradizionali potrà oggi essere trattato con risultati migliori con le frese **Goldies®**.

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

1/4 Ct.		3/8 Ct.		1/2 Ct.			3/4 Ct.		1 Ct.		1-1/2 Ct.		2 Ct.	2-1/2 Ct.	3 Ct.	3-1/2 Ct.	4 Ct.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.0	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.9	9.6	10.4	11.1
.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437
			0459														
									0494				0495				0523
			0463						0496				0497				
0428			0466						0502				0503				0525
			0464						0498				0499				
0430			0467						0504				0505				0526
0426			0465						0500				0501				0524
0421		0422		0460	0461		0462		0492				0493				
0416	0417	0418	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0487	0488	0489	0490	0491	0512	0513	0521	0522
0410	0411	0412	0449	0450	0451		0452		0484		0485		0486				0520
0404	0405	0406	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0479	0480	0481	0482	0483	0510	0511	0518	0519
0399		0400		0440	0441		0442		0476		0477		0478		0509		0517
0395		0396		0437	0438		0439		0473		0474		0475		0508		0516
0390	0391	0392	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0468	0469	0470	0471	0472	0506	0507	0514	0515

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

Dedeco offre una varietà di assortimenti in ciascuna delle forme più utilizzate. Ogni assortimento contiene un porta frese in plexiglass da 36 fori.

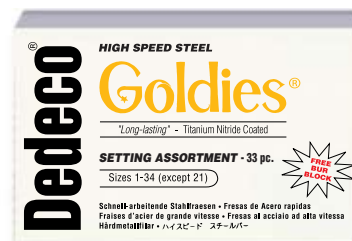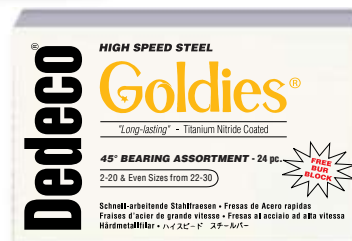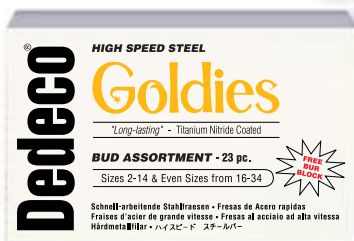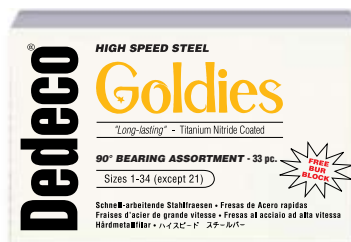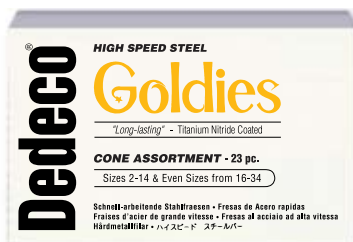

Round 1-18	18/kit	0527
Round 1-26 (eccetto 21)	25/kit	0528
Round 1-30 (eccetto 21)	29/kit	0529
Round 1-34 (eccetto 21)	33/kit	0530
Bud 2-14 e anche misure 16-26	19/kit	0531
Bud 2-14 e anche misure 16-34	23/kit	0532
Cone 2-14 e anche misure 16-26	19/kit	0533
Cone 2-14 e anche misure 16-34	23/kit	0534
90° Bearing Cutter 1-18	18/kit	0535
90° Bearing Cutter 1-26 (eccetto 21)	25/kit	0536
90° Bearing Cutter e anche misure 2-28	14/kit	0537
90° Bearing Cutter 1-34 (eccetto 21)	33/kit	0538
45° Bearing Cutter 2-18	17/kit	0539
45° Bearing Cutter e anche misure 2-28	14/kit	0540
45° Bearing Cutter 2-20 e anche misure 22-30	24/kit	0541
Setting 1-18	18/kit	0542
Setting 1-26 (eccetto 21)	25/kit	0543
Setting 1-30 (eccetto 21)	29/kit	0544
Setting 1-34 (eccetto 21)	33/kit	0545

Dedeco®

Since 1937

Spazzolini di pelo naturale per Gioielleria

Packed 144 per unit

NEW

“Top quality” dal Leader dell'industria. Fabbricato in un solo pezzo. Setole di pelo naturale posizionate uniformemente per una performance elevata e la massima durata.



7/8" (22.2mm) Diameter • 1/4" (6.3mm) Trim



Soft

7054

Medium

7055

Hard

7056

Dedeco®

Since 1937

Punte in tungsteno per Gioielleria

Confezione da 1 pezzo

NEW

Florentine

Punte in tungsteno monofusione “Top quality” con mandrino da 3/32" (2.35mm) disponibili in tutte le forme standard dell'industria.

Goldies®

3/32" (2.35mm) shanks



Barrel

Cylinder

Point

8441

8442

8443

Senza rivestimento

3/32" (2.35mm) shanks



Barrel

Cylinder

Point

9441

9442

9443

Interno anelli

Fatte con la stessa qualità “top”, queste frese cilindriche sono ideate appositamente per rimuovere velocemente le imperfezioni, lisciare e rifinire la superficie interna degli anelli.

1/4" (6.3mm) diameter • 3/32" (2.35mm) shanks



X-Fine

Standard

X-Coarse

8411

8412

8413

1/4" (6.3mm) diameter • 3/32" (2.35mm) shanks



X-Fine

Standard

X-Coarse

9411

9412

9413

3/8" (9.5mm) diameter • 1/8" (3.18mm) shanks



X-Fine

Standard

X-Coarse

8421

8422

8423

3/8" (9.5mm) diameter • 1/8" (3.18mm) shanks



X-Fine

Standard

X-Coarse

9421

9422

9423

Goldies®

Durano 3 volte di più!



Per Pulitrice - Realizzate per rimpiazzare nastri da mandrino ed i tradizionali sgrossatori per acrilico. Disponibili in grana grossa e fine. Usare con un mandrino standard da 3/4" arbor band.

Goldies[®]

Senza rivestimento

3/4" (19mm) diameter



Coarse
2/box

2541

Fine
2/box

2542

3/4" (19mm) diameter



Coarse
2/box

2741

Fine
2/box

2742

Per Manipolo - Realizzate per rimpiazzare nastri da mandrino ed i tradizionali sgrossatori per acrilico. Disponibili solo in grana fine. Usare con un mandrino Dia-Dome HP.

1/2" (12.7mm) diameter



Fine
1/unit

2543

Fine
3/box

2547

1/2" (12.7mm) diameter



Fine
1/unit

2743

Fine
3/box

2747

1/2" (12.7mm) diameter
3/32" (2.35mm) shanks



Fine
2/kit

2544

Mandrino Dia-Dome HP

3/32" (2.35mm) shanks



-
1/unit

2745

1/2" (12.7mm) diameter
3/32" (2.35mm) shanks



Fine
2/kit

2744

“Slims Sinterizzati” – Dischi Diamantati Sinterizzati

Confezione da 1 pezzo

Il disco diamantato “migliore in assoluto” di più lunga durata per tagliare velocemente composito ed acrilico.



7/8" x .007"
(22 · 0.18mm)
2807



1-1/4" x .032"
(32 · 0.8mm)
2803



1-1/4" x .025"
(32 · 0.6mm)
2825

Frese e dischi diamantati. Grana grossa e fine.

3/32" (2.35mm) shanks

Goldies®

Senza rivestimento

Coarse



49/1060 **2501** 75/1060 **2502** 77/1060 **2503** 78/1060 **2504** 78/1090 **2505** 79/1045 **2506**



49/1060 **2701** 75/1060 **2702** 77/1060 **2703** 78/1060 **2704** 78/1090 **2705** 79/1045 **2706**

Fine



49/4060 **2551** 75/4060 **2552** 77/4060 **2553** 78/4060 **2554** 78/4090 **2555** 79/4045 **2556**



49/4060 **2707** 75/4060 **2708** 77/4060 **2709** 78/4060 **2710** 78/4090 **2711** 79/4045 **2712**

Fine



23/4030 **2601** 49/4030 **2602** 42/4050 **2603** 48/4030 **2604** 71/4030 **2605** 212/4020 **2606**



23/4030 **2713** 49/4030 **2714** 42/4050 **2715** 48/4030 **2716** 71/4030 **2717** 212/4020 **2718**

Fine



212/4030 **2607** 212/4040 **2608** 213/4040 **2609** 231/4080 **2610** 232/4120 **2611** 234/4080 **2612**



212/4030 **2719** 212/4040 **2720** 213/4040 **2721** 231/4080 **2722** 232/4120 **2723** 234/4080 **2724**

Fine




501/016 **2657** 537/016 **2658** 558/016 **2659** 559/023 **2660** 563/014 **2661** 563/018 **2662**



501/016 **2725** 537/016 **2726** 558/016 **2727** 559/023 **2728** 563/014 **2729** 563/018 **2730**



"Superflex" Discs wrap-around
D/S-220 x .15mm **2651**
S/S-220 x .10mm **2654**

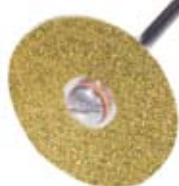

"Superflex" Discs full-surface
D/S-220 x .18mm **2652**
S/S-220 x .13mm **2655**



"Flexible" Discs full-surface
D/S-220 x .3mm **2653**
S/S-220 x .2mm **2656**



"Superflex" Discs wrap-around
D/S-220 x .15mm **2751**
S/S-220 x .10mm **2752**



"Superflex" Discs full-surface
D/S-220 x .18mm **2753**
S/S-220 x .13mm **2754**



"Flexible" Discs full-surface
D/S-220 x .3mm **2755**
S/S-220 x .2mm **2756**




Semplicemente i migliori !

Non importa su che materiale lavorano, che sia ceramica, oro, composito, smalto, acrilico, zirconio o qualsiasi delle numerose leghe semi-preziose e non-preziose per ceramica, DEDECO offre il disco "perfetto" per eseguire il lavoro velocemente e con professionalità.

Dischi e Tagliaperni in Carburo di silicio - Multi-uso


I dischi ed i tagliaperni di più lunga durata. Il legante speciale a doppio legame resinoso assicura massima durata e performance. I dischi al carburo di silicio ELITE sono ideali per ceramica, oro, smalto, zirconio e leghe per ponti e corone. Spessori a partire da 0,15mm.

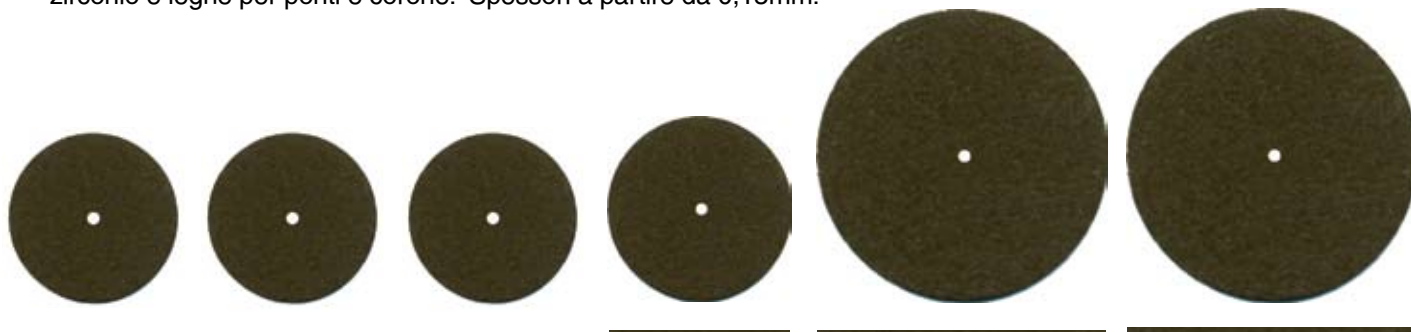

7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box
5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562

Dischi e Tagliaperni all'Ossido di alluminio - Ideali per metalli

I dischi ed i tagliaperni di più lunga durata. Il legante speciale a doppio legame resinoso assicura massima durata e performance. I dischi all'ossido di alluminio ELITE sono ideali per metalli duri. Spessori a partire da 0,15mm.

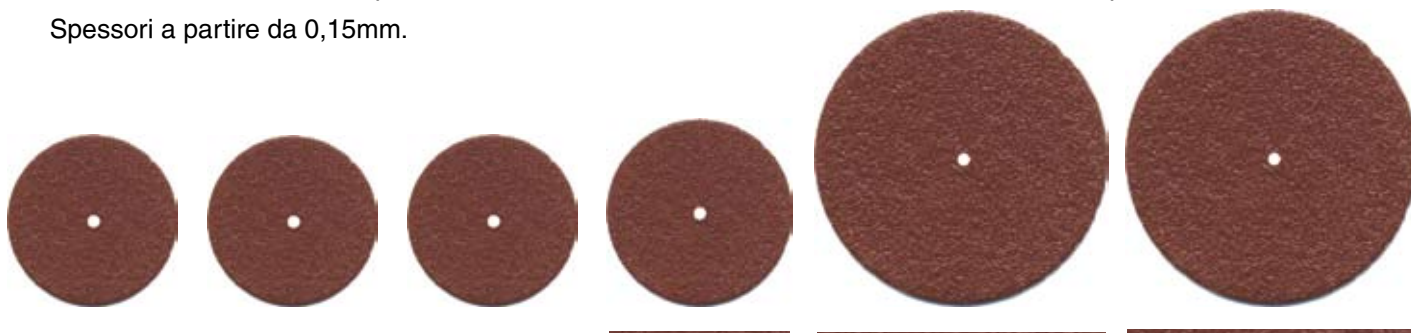

7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box
5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512



Apprezzati da sempre

Dischi in Carburo di Silicio - Multi-uso

Ultra - 0,1 – Il più sottile dei dischi per porcellana, oro, smalto e leghe per ponti e corone.	7/8" x .005" (22 · 0.15mm)	25/box 100/box	5190 5197
NM Slims - 0,2 – L'originale disco ultrasottile per porcellana, oro, smalto e leghe per ponti e corone.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/box 50/box 100/box	5172 5170 5171
Very Thin - 0,3 – Stesse caratteristiche del NM Slims eccetto che leggermente più spesso.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/box 100/box	5181 5182
Wafer Thin Discs – Disco molto sottile per porcellana, oro, smalto e leghe per ponti e corone. Disponibile un lato (s/s) e due lati (D/S).	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	100/box 100/box	5178 D/S 5180 S/S
Stripper Discs – Dischi a due lati a grana grossa per rifinire e tagliare oro e porcellana.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/box	5177
Dischi a due lati – Standard per porcellana, oro, e smalto.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/box	5203
Dischi a un lato – Standard per porcellana, oro, e smalto.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/box	5206

Dischi all'Ossido di alluminio - Ideali per metalli

Dischi A/O - 0,2 – Disco ultrasottile a lunga durata per oro e tutti i metalli.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/box 100/box	5173 5183
Dura - 0,3 – Stesse caratteristiche del A/O eccetto che leggermente più spesso.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/box 100/box	5188 5189
Tagliaperni Junior – La scelta giusta per tagliare e rifinire cromocobalto. Veloce, a freddo, senza odori e a lunga durata.	15/16" x .018" (24 · 0.4mm)	100/box	5210
Rubi Mini-Slitters – Il "migliore in assoluto" per tagliare velocemente senza riscaldare tutte le leghe preziose e non preziose per ceramica. "Non contaminanti"	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/box	5176
Dischi High Speed – Tradizionali per tagliare velocemente senza riscaldare tutte le leghe.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/box	5209
Dischi "RED" – Tradizionali per tagliare e rifinire cromocobalto e leghe non preziose.	15/16" x .025" (24 · 0.6mm)	100/box	7021




Semplicemente i migliori !

Infrangibile • Multi-uso • Dischi Flessibili rinforzati in Fibra


Carburo di silicio

Per porcellana, oro, zirconio e leghe per ponti e corone.

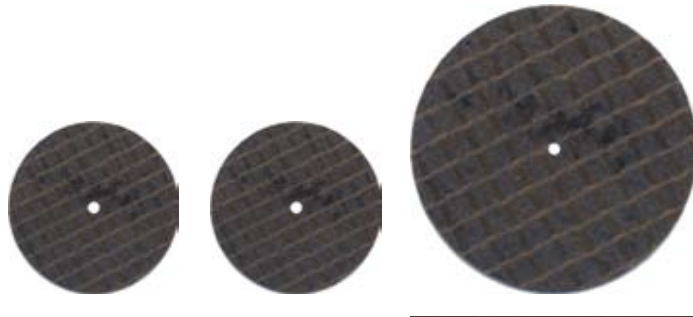

Ossido di alluminio

La scelta ideale per i metalli duri.

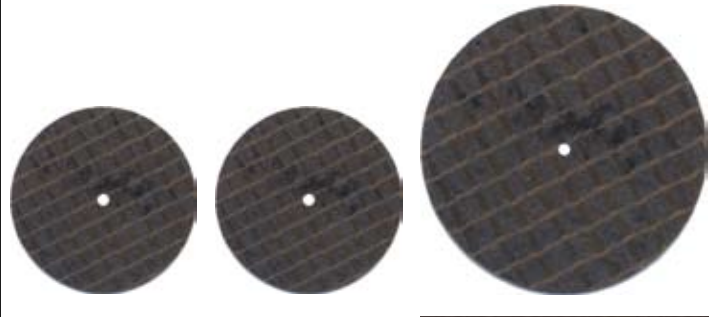

7/8" x .009"
(22·0.2mm)

7/8" x .015"
(22·0.3mm)

1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

5581

5583

5585

15/16" x .009"
(24·0.2mm)

15/16" x .015"
(24·0.3mm)

1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

5571

5573

5575

Dischi tradizionali in fibra

IL LEADER DELL'INDUSTRIA

Detti "Fibre-Cut", i dischi rinforzati in fibra DEDECO tagliano qualunque cosa dai metalli duri agli acrilici soffici. (ossido di alluminio)

1-1/4" x .049" x 1/16" (32·1.2mm)	12/box 100/box	7000 9858
1-1/2" x .049" x 1/16" (38·1.2mm)	12/box 100/box	7001 9588
2-1/2" x .049" x 1/4" (64·1.2mm)	6/box 100/box	7002 9589
3" x .049" x 1/4" (76·1.2mm)	6/box 100/box	7003 9590
4" x .049" x 1/4" (101·1.2mm)	6/box 100/box	7004 9591



Mandrino Fibre-Cut Confezione da 1 pezzo

Il mandrino ideale per dare il massimo di durata ed affidabilità ai Dischi Fibre-Cut da 64, 76 e 101 mm (per pulitrice).

7005



1/4" (6.3mm) shank

I favoriti della DEDECO per tagliare e rifinire cromocobalto. Veloci, non scaldano senza odori. (ossido di alluminio)

TAGLIAPERNI 32mm

1-1/4" x .025" (32·0.6mm)	1-1/4" x .032" (32·0.8mm)	1-1/4" x .049" (32·1.2mm)	1-1/4" x .062" (32·1.6mm)	1-1/4" x .082" (32·2.2mm)
5163	5168	5166	5165	5164

TAGLIAPERNI 38mm



1-1/2" x .032" (38·0.8mm)	1-1/2" x .049" (38·1.2mm)
5169	5167



Rubi Slitters

Confezione da 100 pezzi

Il "migliore in assoluto" per tagliare velocemente senza riscaldare tutte le leghe preziose e semi-preziose per ceramica. "Non contaminanti" e a lunga durata. (ossido di alluminio)

1-1/2" x .032" (38·0.8mm)
5174

Tagliaperni "RED"

Confezioni da 12 e 100 pezzi

Standard per tagliare e rifinire cromocobalto. (ossido di alluminio)



1-1/4" x .062" (32·1.6mm)	1-1/2" x .025" (38·0.6mm)	1-1/2" x .040" (38·1.0mm)
12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 100/box
7006 7022	7007 7023	7008 7024

Dischi e tagliaperni a superficie liscia per cromocobalto e metalli non preziosi. (ossido di alluminio)



1" x .027" (25·0.7mm)	1-3/8" x .027" (35·0.7mm)	1-3/8" x .066" (35·1.7mm)	1-5/8" x .040" (40·1.0mm)
5211	5212	5213	5214


Il legante che non si impasta espone di continuo nuova parte abrasiva senza scaldare neanche minimamente. L'anello centrale in metallo garantisce una centratura perfetta.

Nero • *Grana grossa* (carburo di silicio) – Multi-uso.

Verde • *Fine* (carburo di silicio) – Ideale per ceramica e smalto. Lascia lisce le superfici. Più facile da lucidare.

Bianco • *Fine* (ossido di alluminio) – “Non contaminante.” Per rifinire metalli preziosi e semi-preziosi.

Rosso • *Grana grossa* (ossido di alluminio) – Per rifinire velocemente metalli non-preziosi e semi-preziosi per ceramica.

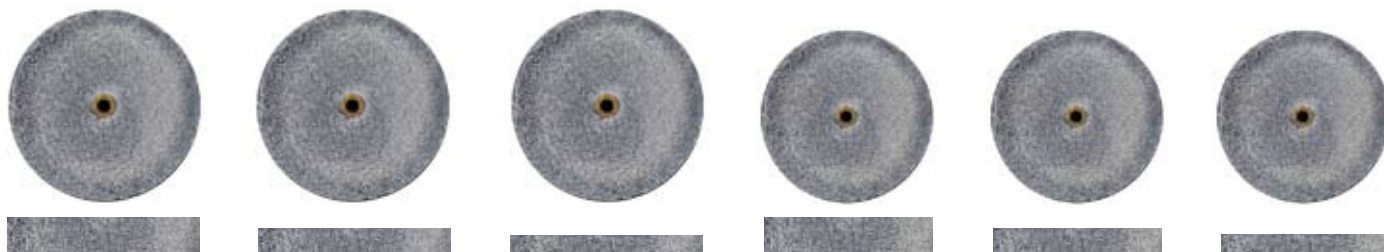

1

2

3

4

5

6

1" x 3/16"
(25 · 4.8mm)

1" x 1/8"
(25 · 3.1mm)

1" x 3/32"
(25 · 2.4mm)

7/8" x 3/16"
(22 · 4.8mm)

7/8" x 1/8"
(22 · 3.1mm)

7/8" x 3/32"
(22 · 2.4mm)

0801


0802

0803

0804

0805

0806

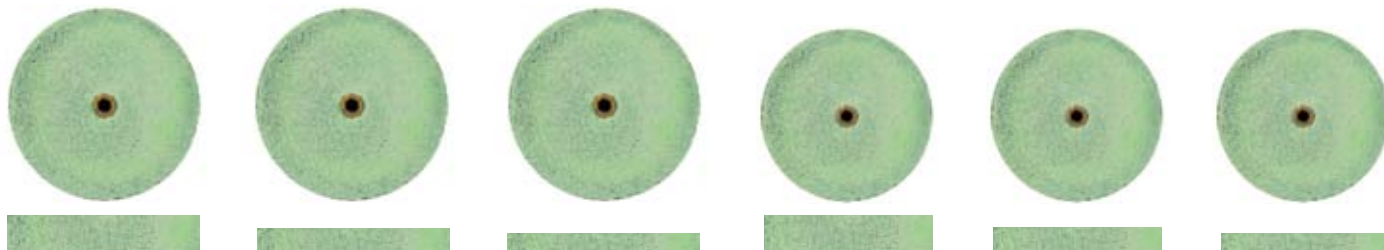

0816


0817

0818

0819

0820

0821

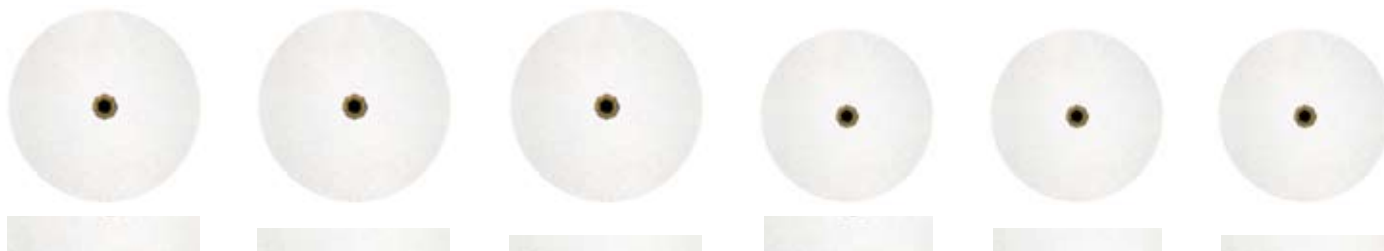

0831

0832

0833

0834

0835


0836




0846

0848


0850

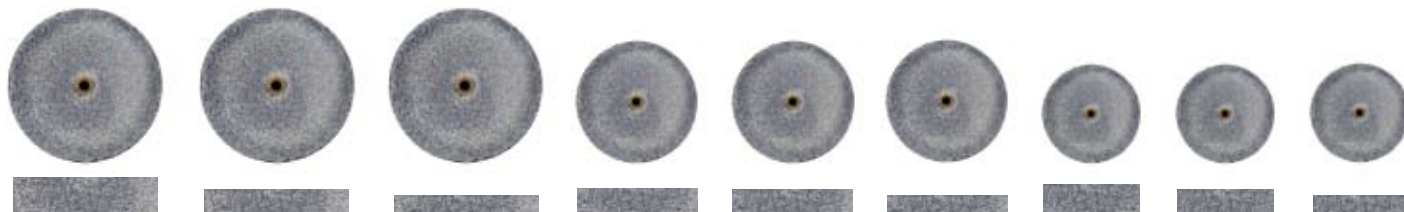

7	8	9	10	11	12	13	14	15
3/4" x 3/16" (19 · 4.8mm)	3/4" x 1/8" (19 · 3.1mm)	3/4" x 3/32" (19 · 2.4mm)	5/8" x 3/16" (15 · 4.8mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	5/8" x 3/32" (15 · 2.4mm)	1/2" x 3/16" (12 · 4.8mm)	1/2" x 1/8" (12 · 3.1mm)	1/2" x 3/32" (12 · 2.4mm)
0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815

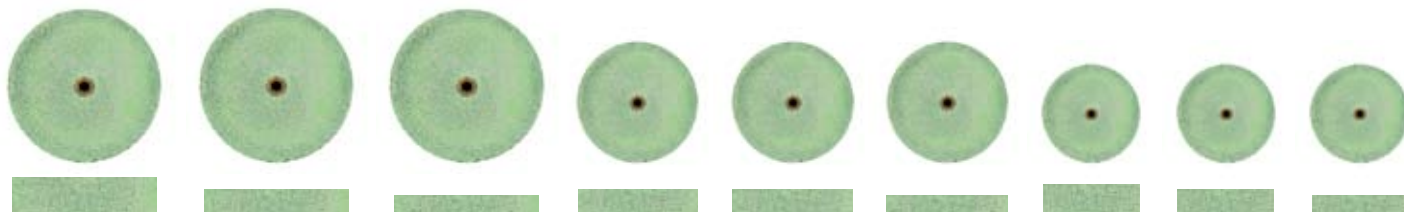

0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830
------	------	------	------	------	------	------	------	------

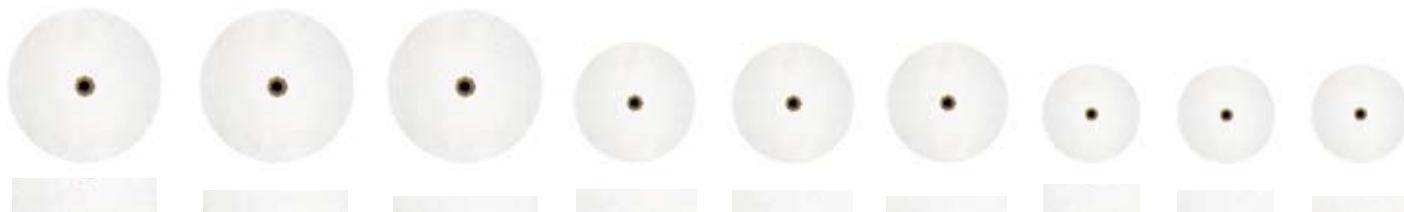


0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845
------	------	------	------	------	------	------	------	------



	0853							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Non importa su che materiale lavorano, che sia ceramica, oro, smalto, o qualsiasi delle numerose leghe semi-preziose e non-preziose per ceramica, DEDECO offre la ruota abrasiva "perfetta" per eseguire il lavoro velocemente e con professionalità.

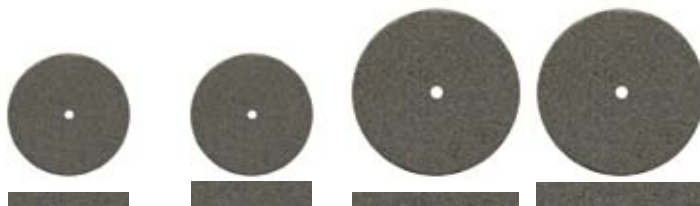

Taglio Fine - Per una rifinitura veloce, senza calore, senza graffi, di porcellana oro e smalto. Lascia la superficie più fine e più facile da lucidare. (carburo di silicio)

Verde Universale - Multi uso possiede le stesse eccezionali qualità del taglio fine. (carburo di silicio)

Nero Universale - Di lunga durata per rifinire oro e fusioni in metallo. (carburo di silicio)

"High Speed" - Per rifinire velocemente il cromo cobalto e i metalli duri. A lunga durata. (ossido di alluminio)

Rubi - Per una rifinitura più rapida di tutte le leghe ceramiche e semi-preziose. (ossido di alluminio)

5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	5/8" x 1/8" (15·3.1mm)	7/8" x 1/16" (22·1.6mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)
5355	5354	5351	5350
5385	5384	5381	5380
5375	5374	5371	5370
—	—	—	5390
—	—	—	5397



	3" x 1/4" (76·6.3mm)	3" x 3/8" (76·9.5mm)
Verde - Grana morbida, permette un molaggio dei denti in porcellana senza scheggiature in modo rapido e senza riscaldare.	5122	5123
Nero - Grana media, per un molaggio di denti in porcellana senza scheggiature in modo rapido e senza riscaldare.	5126	5127
Mole per base-plate - Per una veloce sgrossatura di base-plate e dentiere in acrilico.	5137	5138
Verde Medio - Ruota con legante gommoso per togliere screpolature da ceramica e metallo.	5147	5148
Rosso per Acrilico - Consente il molaggio molto rapido di ribasature soffici senza riscaldare.	5159	5160
Bianco "Imbattibile" - Per un rapido molaggio di modelli in gesso e rivestimento.	5161	5162

Retro in Velcro • Cambio rapido • 100% Resistente all'acqua

Si eliminano tutte le perdite di tempo con i dischi col retro in velcro STICKIES.

		Grana grossa 36 grit	Standard 50 grit
10" Kit Completo	6 Dischi da 10" 1 Ruota in plastica	7062	7060
Ricambio da 10"	Dischi da 6 - 10"	7063	7061
Kit Completo da 12"	4 Dischi da 12" 1 Ruota in plastica	7072	7070
Ricambio da 12"	4 Dischi da 12"	7073	7071



Perfettamente bilanciato • Rinforzate in fibra di vetro • A lunga durata

Le mole per squadramodelli Dedeco sono ora rinforzate in fibra di vetro per un bilanciamento perfetto e una maggiore durata.

NORMALE

10" x 1/4"	(254 · 6.3mm)	36 grit	7010
12" x 1/4"	(305 · 6.3mm)	36 grit	7012

Grana Extra-Grossa - 24 grit
Grana Grossa - 36 grit

TIPO FOSTER - (con un secondo foro di posizionamento)

10" x 1/4"	(254 · 6.3mm)	36 grit	7011
12" x 1/4"	(305 · 6.3mm)	36 grit	7013
10" x 1/4"	(254 · 6.3mm)	24 grit	7014
12" x 1/4"	(305 · 6.3mm)	24 grit	7015



Le migliori in assoluto" per una rifinitura rapida senza riscaldare, senza sbavature, di porcellana, oro, smalto e amalgama. Sono praticamente universali. (carburo di silicio)

HP Confezione da 12 & 72 pezzi

3/32" (2.35mm) shanks

	138 (CN1)	126 (CN3)	114 (CY1)	115 (CY3)	160 (CY4)	111 (FL2)	161 (FL3)	132 (FL3a)	162 (FL4)	113 —	127 (IC1)	
12/box	4223	4213	4048	4208	4031	4202	4032	4219	4033	4207	4214	
72/box	6223	6213	6248	6208	6231	6202	6232	6219	6233	6207	6214	
	125 (IC2)	128 (IC3)	163 (IC4)	129 (IC5)	130 —	164 (IC6)	165 (IC7)	166 (IC8)	167 (IC9)	135 (KN1)	168 (KN2)	
12/box	4029	4215	4034	4216	4217	4035	4036	4037	4038	4221	4039	
72/box	6229	6215	6234	6216	6217	6235	6236	6237	6238	6221	6239	
	133 (KN4)	151 —	152 (KN7)	169 (PC1)	170 (PC2)	18 (RD1)	17 (RD2)	131 (RD3)	19 (RD4)	171 (RE1)	123 —	
12/box	4220	4226	4227	4040	4041	4204	4030	4218	4222	4042	4212	
72/box	6220	6226	6227	6240	6241	6204	6230	6218	6222	6242	6212	
	122 (TC1)	120 (TC2)	172 (TC3)	112 —	173 (TC4)	16 (WH1)	13 —	174 (WH3)	175 (WH4)	176 (WH5)	141 —	143 (WH6)
12/box	4211	4210	4043	4206	4044	4203	4201	4045	4046	4047	4224	4225
72/box	6211	6210	6243	6206	6244	6203	6201	6245	6246	6247	6224	6225

RA Confezione da 12 pezzi

FG Confezione da 12 pezzi

3/32" (2.35mm) shanks

1/16" (1.6mm) shanks

	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	19 (RD4)	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	113 —	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
12/box	4323	4302	4304	4322	4311	4310	4306	4307	4423	4402	4404	4411

Dedeco®

Since 1937

Punte Montate Bianche "Arkansas"

Confezione da 12 pezzi

**IL LEADER
DELL'INDUSTRIA**

Le migliori in assoluto per una rifinitura ultrafine di composito senza rischi di intaccare lo smalto. (ossido di alluminio)

HP

3/32" (2.35mm) shanks



138 (CN1)	114 (CY1)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	125 (IC2)	135 (KN1)	133 (KN4)	18 (RD1)	17 (RD2)	122 (TC1)	16 (WH1)	141 —	143 (WH6)
4523	4509	4508	4502	4519	4507	4514	4529	4521	4520	4504	4528	4511	4503	4524	4525

RA**FG****Kit per Composito**

Confezione da 12 pezzi

3/32" (2.35 mm) shanks

1/16" (1.6mm) shanks



138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4623	4602	4604	4611



138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4723	4702	4704	4711



Kit contenenti 3 punte "Verdi Giant" e 3 punte "Bianche Arkansas" forme 138 (CN1) e 111 (FL2).

RA - 1053

FG - 1054

Dedeco®

Since 1937

Punte Montate A/O "Rubi"

Confezione da 12 & 72 pezzi

**IL LEADER
DELL'INDUSTRIA**

Le "migliori in assoluto" per rifinire accuratamente leghe non preziose e semi preziose per ceramica. Non contaminanti e a lunga durata. (ossido di alluminio)

HP - 3/32" (2.35mm) shanks



1 —	138 (CN1)	126 (CN3)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	128 (IC3)	129 (IC5)	130 —	135 (KN1)	133 (KN4)	
12/box	4161	4823	4813	4808	4802	4819	4807	4814	4815	4816	4817	4821	4820
72/box	4261	4923	4913	4908	4894	4919	4907	4914	4915	4916	4917	4921	4920



151 —	152 (KN7)	18 (RD1)	131 (RD3)	19 (RD4)	123 —	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	16 (WH1)	13 —	141 —	143 (WH6)	
12/box	4826	4827	4804	4818	4822	4812	4811	4810	4806	4803	4801	4824	4825
72/box	4926	4927	4897	4918	4922	4912	4911	4910	4899	4896	4895	4924	4925

Dedeco®

Since 1937


Punte Montate Diamantate

Confezione da 1 pezzo

NEW

A lunghissima durata!
Punte montate diamantate per grossare, modellare e rifinire corone in ceramica e cappette in zirconio.

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

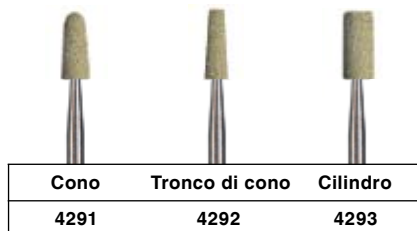**Dedeco®**

Since 1937

Il Leader dell'industria

IL LEADER DELL'INDUSTRIA

Punte a legante ceramico per la rifinitura di tutti i metalli. (ossido di alluminio)

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

Grana Grossa – Per una rifinitura rapida di cromocobalto e metalli duri.

Grana Media – Ideali per rifinire metalli non preziosi per ponti e corone.



12 / box	4171	4172	4173	4175	4181	4182	4183	4185
72 / box	4271	4272	4273	4275	4281	4282	4283	4285

Dedeco®

Since 1937

"Affilatori di strumenti"

IL LEADER DELL'INDUSTRIA

Pietre all'ossido di alluminio con legante ceramico per aggiustare ed affilare gli strumenti. "Lavorazione veloce" - "lunga durata".

HP - 3/32" (2.35mm) shanks



5 Piece
"Instrument Sharpener"
Assortment

5/8" Round	1/2" Round	3/8" Round	1/4" Round	3/16" Cone	—
1/unit	1/unit	1/unit	1/unit	1/unit	5/kit
5401	5402	5403	5404	5406	5410

Dedeco®

Since 1937

Truing Block

Confezione da 1 pezzo

IL LEADER DELL'INDUSTRIA

Permette di restaurare o modificare la forma degli abrasivi. (carburo di silicio)

5400



1" x 1/2" x 1/2"
(25·12.7·12.7mm)

In risposta alle richieste del mercato abbiamo incrementato la ns. gamma per fornire i “fai-da-te” e i fanatici di qualche “hobby” con gli accessori più popolari.



Utilizzabili con tutti gli strumenti rotanti più diffusi

Assortimento Multi-Use	134/kit	3100
Tagliaperni rinforzati in fibra di vetro • 1-1/4" x .049"	10/pz.	3601
Dischi tagliaperni tradizionali • 15/16" x .025"	50/pz.	3602
Dischi tagliaperni "Heavy Duty" • 15/16" x .040"	25/pz.	3603
Mandrini • attacco da 1/8" (3.18mm)	2/kit	3604
Set di punte diamantate • attacco da 1/8" (3.18mm)	6/kit	3605
Punte ad alta velocità • attacco da 1/8" (3.18mm)	3/kit	3608
Spazzolini metallici a ruota • attacco da 1/8" (3.18mm)	2/pz.	3609
Set di frese per incisione • attacco da 3/32" (2.35mm)	6/kit	3611
Set di gommini lucidanti • attacco da 3/32" (2.35mm)	6/kit	3612
Set pietre abrasive • attacco da 1/8" (3.18mm)	3/kit	3613
Metal Magic	2/pz.	3698

Acciaio inossidabile - attacco da 3/32" (2.35mm)

HIPPIE



HP



RA



12/box 144/box

5428 5438

12/box 144/box

5425 5435

12/box 144/box

5426 5436

2mm PIN



3mm PIN



1/unit 12/box

7081 7082

1/unit 12/box

7083 7084

Placcati in Nichel

STONE CHUCK



SPIRALE



1/4" (6.3mm) shank

1/unit

5121

3/32" (2.35 mm) shank

12/box 144/box

5427 5437

1/8" (3.18mm) shank

6/box

5429

Portafrese in plexiglass

Confezione da 1 pezzo

Dedeco ha il piacere di offrire una gamma di alta qualità di portafrese in plexiglass.

70 - Fori



8-1/2" x 6-1/4" x 1-1/2"

HP

3/32" (2.35mm)

9597

36 - Fori



4-1/2" x 3" x 3/4"

HP

3/32" (2.35mm)

9594

12 - Fori



2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"

FG

1/16" (1.6mm)

9650

HP

3/32" (2.35mm)

9651

0301-0526	Frese in acciaio ad alta velocità Goldies	27-28	4602-4623	Punte montate bianche Arkansas - RA.....	42
0527-0545	Frese in acciaio ad alta velocità Goldies. Assortimenti	29	4660-4683	Gommini Midgets per lucidatura	2-3
0801-0853	Koolies – Ruotine abrasive non riscaldanti	37-38	4702-4723	Punte montate bianche Arkansas - FG.....	42
1010-1011	Assortimenti Classici	5	4760-4783	Gommini Midgets per lucidatura	2-3
1053-1054	Kit Rifinitura Composito	42	4801-4827	Punte montate A/O Rubi.....	42
1101-1150	Gommini diamantati per lucidatura ceramica.....	6	4860-4883	Gommini Midgets per lucidatura	2-3
1161-1175	Gommini diamantati per lucidatura composito.....	5	4894-4927	Punte Montate A/O Rubi.....	42
1180-1181	Gommini diamantati per lucidatura ceramica.....	6	4930-4933	Ruotine Super Polish.....	4
1185-1188	Gommini diamantati per lucidatura composito "Hi-gloss"	5	4940-4983	Ruotine in gomma lenticolari.....	1
2300-2406	Frese al tungsteno Goldies – FG	19	4988-5030	Ruotine in gomma.....	1
2501-2506	Diamantate Goldies - HP	32	5042-5047	Ruotine Super Polish.....	4
2541-2547	Cappucci diamantati Goldies	31	5100-5106	Fresoni per acrilico bianchi	10
2551-2612	Punte diamantate Goldies – HP.....	32	5110-5114	Specialità per acrilico.....	10
2651-2656	Dischi diamantati Goldies.....	32	5121	Mandrino per pulitrice	45
2657-2662	Punte diamantate Goldies - HP.....	32	5122-5162	Mole per pulitrice	39
2701-2730	Punte diamantate - HP.....	32	5163-5169	Tagliaperni.....	36
2741-2747	Cappucci diamantati e mandrini	31	5170-5173	Dischi separatori	34
2751-2756	Dischi diamantati.....	32	5174	Tagliaperni Rubi Slitters	36
2803-2825	Dischi diamantati sinterizzati	31	5176-5210	Dischi separatori	34
3100	Assortimento multi uso	44	5211-5214	Tgliaperni rapidi.....	36
3500	Assortimento Classico.....	5	5230-5235	Sgrossatori per acrilico in gomma - Verde.....	10
3601-3698	Confezioni varie per hobbistica.....	44	5240-5295	Gommini Jumbo.....	3
4029-4048	Punte montate verdi "Giant" - HP.....	41	5350-5397	Ruote abrasive.....	39
4161	Punte montate A/O Rubi.....	42	5400	Blocco per modellare abrasivi.....	43
4171-4185	Punte montate per laboratorio	43	5401-5410	Strumenti per affilatura.....	43
4201-4227	Punte montate verdi "Giant" – HP	41	5415-5422	Mole per pulitrice	1
4261	Punte montate A/O Rubi.....	42	5423	Mandrino Snap-On.....	5
4271-4285	Punte montate da laboratorio	43	5425-5438	Mandrini.....	45
4291-4293	Punte montate diamantate	43	5440-5495	Gommini Jumbo.....	3
4302-4323	Punte montate verdi "Giant" – RA.....	41	5501-5562	Dischi separatori Elite.....	33
4333	Gommini Midgets classici HP - Assortimento	18	5571-5585	Tagliaperni in fibra Elite	35
4336-4387	Gommini Midgets per lucidatura	2-3	5988-5999	Ruotine in gomma interprossimali.....	1
4402-4423	Punte montate verdi "Giant" – FG	41	6100-6106	Peroni per acrilico rossi.....	10
4502-4529	Punte montate bianche Arkansas - HP.....	42	6201-6248	Punte montate verdi "Giant"- HP.....	41
4560-4583	Gommini Midgets per lucidatura	2-3	6501-6534	Punte montate abrasive con pomice per orafi.....	4
4590-4595	Gommini cilindrici per lucidare.....	1	6561-6570	Ruotine Miracolo d'Oro in silicone.....	14

6601-6624	Gommini Midgets per lucidatura.....	2	7750	Kit per rifinitura e lucidatura acrilico.....	9
7000-7005	Tagliaperni in fibra dischi e mandrini.....	35	7801-7848	Gommini in Poliuretano.....	11-13
7006-7008	Tagliaperni rossi.....	36	7851-7852	Gommini in Poliuretano "Pin" - Assortimento.....	18
7010-7015	Dischi per squadramodelli.....	40	7853	Midgets in Poliuretano - Assortimento.....	18
7021	Dischi separatori rossi.....	34	7854	Midgets in Silicone "Universali" - Assortimento.....	18
7022-7024	Tagliaperni Rossi.....	36	7855	Gommini con pomice per orafi - Assortimento.....	18
7027-7030	Gommini rossi duri per cromocobalto.....	4	7856	Kit gommini in Poliuretano per lucidatura metallo...	18
7054-7056	Spazzolini per orefici.....	30	7901-7928	Gommini in Poliuretano e silicone speciale.....	14
7060-7073	Dischi per squadramodelli adesivi Stickies.....	40	7951-7958	Gommini in Poliuretano - Bianchi Flexies.....	14
7081-7084	Mandrini per gommini "Pin".....	45	7961-7976	Ring Buffs & Split Laps per orefici.....	17
7100	Mole in Silicone "Universali" - bianche.....	17	8000-8306	Goldies in tungsteno.....	19-20
7101-7140	Gommini in Silicone lucidanti "Universali" - Bianchi.....	15-16	8310-8379	Euro Carbide Goldies in tungsteno.....	21-22
7150	Mole in Silicone "Universali" - Nere.....	17	8411-8443	Goldies rotonde in tungsteno per orefici.....	30
7151-7190	Gommini in Silicone lucidanti "Universali" - Neri.....	15-16	8451-8482	Tsunami Goldies.....	23
7200	Mole in Silicone "Universali" - Blu.....	17	8500	Frese Goldies.....	23
7201-7240	Gommini in Silicone lucidanti "Universali" - Blu.....	15-16	9000-9306	Frese in tungsteno.....	23-24
7250	Mole in Silicone "Universali" - Rosa.....	17	9310-9379	Euro Carbide in tungsteno.....	25-26
7251-7290	Gommini in Silicone lucidanti "Universali" - Rosa.....	15-16	9411-9443	Frese in tungsteno per orefici.....	30
7301-7498	Gommini in Poliuretano.....	11-12	9588-9591	Dischi rinforzati in fibra.....	35
7501-7647	Siliconi per lucidatura porcellana.....	7-8	9594-9651	Portafrese in plexiglass.....	45
7700-7746	Siliconi per lucidatura acrilico.....	9	9858	Dischi rinforzati in fibra.....	35

Garanzia

Dedeco International, Inc. si assume la responsabilità di sostituire o accreditare i prodotti che si dimostrino difettosi. Non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni diretti o indiretti che derivino dall'uso o dalla inabilità all'uso del prodotto. Prima dell'uso l'utilizzatore deve determinare l'adeguatezza del prodotto all'uso e se ne assume tutti i rischi e qualsiasi responsabilità ad essi connessa. Quanto precede non può essere modificato se non con autorizzazione scritta da parte di un amministratore della Società.

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244

phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281

email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

Minis[®]

With **STAINO[®]**
Whitening
Technology

Clean Tight Spaces Between Teeth



Minis

Break-away Design

Minis

Travel Model

Minis

Twin

Minisbox

The World's 1st Interdental Brush Compact

STAINO[®]
The Clean Between Teeth Specialists

Quality products since 1937

Dedeco®

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

(845) 887-4840 • 888-4-DEDECO (433-3326)

fax: (845) 887-5281 • email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com