



La fuente más confiable para yesos.
Sólidos como una roca.

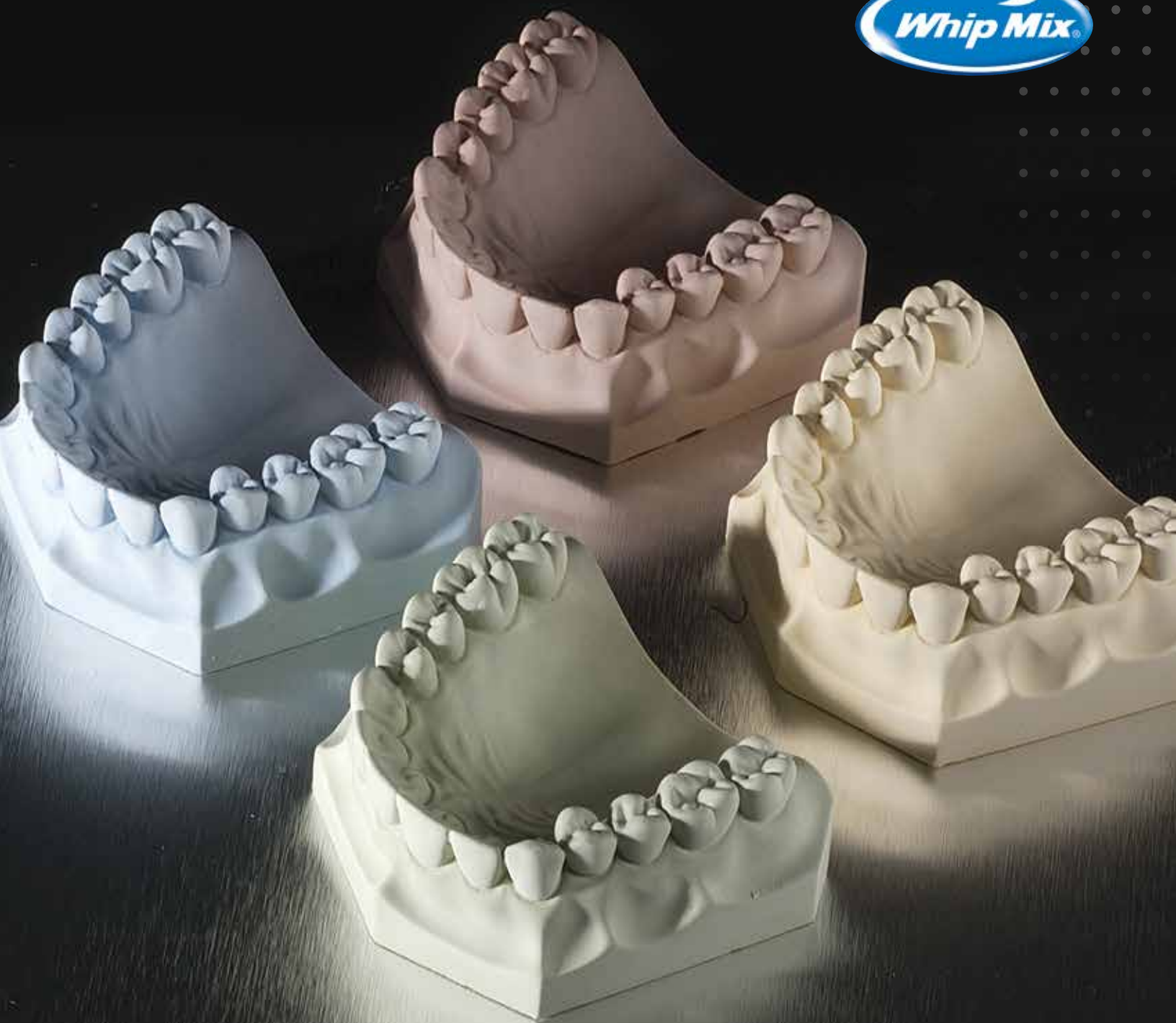

Yeso Piedra Para Troqueles

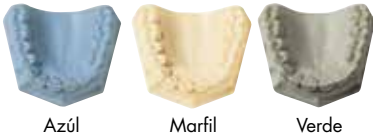

Azúl

Marfil

Verde

RESINROCK XL5 ISO TIPO 5

Yeso para Troqueles fortificado con Resina, con expansión incrementada

Resinrock XL5 tiene la misma suavidad y resistencia a la abrasión que usted ha podido apreciar en el RESINROCK. Sin embargo, este yeso para troqueles ISO Tipo 5 le proporciona expansión incrementada para compensar la contracción del vinil polisiloxano y otros materiales para impresión a base de caucho.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 25 kg (55 lb.)



Marfil

LEANROCK XL5 ISO TIPO 5

Yeso Piedra de fraguado rápido y expansión incrementada

Lean Rock XL5, es un yeso piedra Tipo 5 que ofrece una expansión incrementada para compensar la contracción de vinil polisiloxano y otros materiales de impresión a base de caucho. Lean Rock XL5 tiene las mismas cualidades del Lean Rock el cual fue formulado específicamente para laboratorios que quieren verter pequeñas cantidades (alrededor de 6) y tener modelos de trabajo listo en 15 minutos.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 25 kg (55 lb.)



Aqua

Verde

Marfil

HARD ROCK ISO TIPO 5

Yeso Piedra para Troqueles, de Alta Compresión y Alta Expansión

El Hard Rock es un yeso piedra de alta compresión y de alta expansión. Este material tiene una consistencia cremosa y tixotrópica para buen flujo cuando se vibra, sin embargo, es muy compactable. Su Tiempo de trabajo prolongado facilita vaciados múltiples y su superficie suave, no quebradiza facilita el corte de troqueles sin agrietarse.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados

120 Paquetes de 70 g (Sólo Verde)



Verde

Azúl

JADE STONE ISO TIPO 5

Yeso Piedra de Alta Compresión, para Troqueles

Jade Stone tiene buena compactación después de mezclado, sin embargo, fluye fácilmente con menor vibración. Muy popular por su superficie parecida al jade, compresión alta y expansión baja de fraguado.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados

120 Paquetes de 70 g (Sólo Verde)



Violetaa

Amarillo

Marfil

PRIMA-ROCK ISO TIPO 4

Yeso Piedra de Alta Compresión, para Troqueles

Prima-Rock tiene la fuerza compresiva más alta que cualquier material para troquel Whip Mix. Posee excelentes características de resistencia a la abrasión y manipulación.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)

(Violeta y Amarillo sólo)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Cartón de 5 kg (11 lb.)

(Violeta y Amarillo sólo)

Sobres Prepesados

120 Paquetes de 70 g (Violeta y Amarillo sólo)



Marfil

Blanco

Marrón Dorado

ULTIROCK ISO TIPO 4

Yeso Piedra Premium

UltiRock es un yeso piedra Premium excepcionalmente cremoso para cualquier aplicación de yeso. Su superficie suave no-reflectiva y de alta durabilidad facilita el recorte de troqueles, es resistente a la abrasión y se escanea con facilidad. Además, UltiRock proporcionan una mezcla cremosa que es fácil de verter produciendo así modelos de precisión y troqueles con excelente reproducción de detalles.

EMPAQUE

Volumen

Paquete de 5 kg (11 lb.)

Cubetas de 20 kg 4-5kg (44 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)



RESINROCK ISO TIPO 4

Yeso para Troqueles fortificado con Resina, de baja expansión

Resinrock es una mezcla única de resina sintética y yeso alfa que provee una superficie suave y una resistencia a la abrasión incrementada con su baja expansión de fraguado de 0.08%. Su consistencia tixotrópica ofrece excelentes características de manejo.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 2-2.5 kg (11 lb.)
(Marfil, Gris, Azul y Melocotón sólo)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados

25 Paquetes de 70 g
(Melocotón y Marfil sólo)

25 Paquetes de 70 g Pack
(Caja of 4)
(Melocotón y Marfil sólo)



SILKY-ROCK ISO TIPO 4

Yeso Piedra para Troqueles, de Baja Expansión

Silky-Rock se caracteriza por su baja expansión de fraguador que garantiza exactitud en cualquier tipo de impresión. Es conocido por su fácil uso, consistencia cremosa y suave superficie

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)
(Amarillo, Violeta y Blanco sólo)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados

120 Paquetes de 70 g
(Amarillo, Violeta y Blanco sólo)

80 Paquetes de 140 g
(Amarillo, Violeta y Blanco sólo)



LEANROCK ISO TIPO 4

Yeso de fraguado rápido y baja expansión

LeanRock está formulada específicamente para laboratorios que quieren verte pequeñas cantidades y han trabajado modelos preparados en 15 minutos. El menor tiempo de proceso aumenta la capacidad de realizar reparaciones de emergencia.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

	Relación Agua Polvo (agua en ml por cada 100 g de polvo)	Tiempo De Mezclado (segundos)		Tiempo De Trabajo (minutos)	Tiempo De Fraguado (minutos)	Expansión (%)	Fuerza Compresiva Mpa (psi)		Color	ISO
		Mezclado Mecánico a 350-450 Rpm	Manual (Mezclado a Mano)				Después De 1 hora (húmedo)	Después De 48 horas (seco)		
RESINROCK XL5	20	20-30	60-90	5-7	10	.20	49 (7,000)	76 (11,000)	Verde Azul Marfil	5
LEANROCK XL5	20	20-30	60-90	4-5	5-7	.20	50 (7,200)	82 (11,900)	Marfil	5
HARD ROCK	21	20-30	60-90	6-8	15	.28	49 (7,000)	104 (15,000)	Aqua Verde Marfil	5
JADE STONE	22	20-30	60-90	5-7	10	.18	52 (7,500)	97 (14,000)	Verde Azul	5
PRIMA-ROCK	20	20-30	60-90	6-8	12	.13	55 (8,000)	117 (17,000)	Violeta Amarillo Marfil	4
ULTIROCK	20	20-30	60-90	5-7	10-13	.07	49 (7,200)	76 (11,000)	Blanco Marfil Marrón Dorado	4
RESINROCK	20	20-30	60-90	5-7	10	.08	49 (7,000)	76 (11,000)	Azul Melocotón Gris Marfil Blanco Verde Marrón Dorado	4
SILKY-ROCK	23	20-30	60-90	3-6	10	.09	41 (6,000)	90 (13,000)	Amarillo Violeta Blanco Marfil Marrón Claro	4
LEANROCK	20	20-30	60-90	4-5	5-7	.08	50 (7,200)	85 (12,300)	Marfil Azul	4

Yeso Piedra Para Especialidades



Rosado

SNAP-STONE ISO TIPO 4

Yeso Piedra, de Alta Compresión y Fraguado Rápido

Snap-Stone es un yeso con fraguado excepcionalmente rápido. Listo para ser usado después de solo 5 minutos, SNAP-STONE puede ser usado para placas formadas al vacío, aparatos de ortodoncia, temporales, reparación de dentaduras, modelos de estudio.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 2-2.5 kg (11 lb.)

Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)


Cartón de 5 kg (11 lb.)

Sobres Prepesados

80 Paquetes de 140 g



Blanco

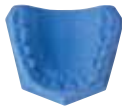

Azúl

FLOWSTONE FS ISO TIPO 4

Fluído, Yeso para Base, de Baja Expansión- 0.08%

FlowStone FS ofrece un tiempo rápido de fraguado de 8 minutos y proporciona los mismos beneficios y características del actual FlowStone.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 22 kg (50 lb.)



Blanco



Amarillo Claro




Azúl

FLOWSTONE ISO TIPO 4

Fluído, Yeso para Base, de Baja Expansión

FlowStone produce bases exactas, libres de burbujas sin realizar vibración, haciéndolo ideal para utilizar con formaletas. La densidad de la superficie resiste la abrasión de los pines dobles y su baja expansión produce una base dimensionalmente estable para excelentes modelos.

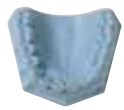

Azúl Claro



Verde Claro

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 22 kg (50 lb.)



Blanco



Azúl

MOUNTING STONE ISO TIPO 3

Yeso Piedra, de Baja Expansión y Alta Compresión

Mounting Stone tiene excelentes características de compactación, se mueve muy libremente bajo la menor presión durante su tiempo de trabajo. Puede usarse como un yeso piedra para modelos de modelo cuando se requiere un fraguado rápido.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)

Sobres Prepesados

100 Paquetes de 100 g



Blanco

BITESTONE ISO TIPO 3

Fraguado Extremadamente Rápido

Yeso piedra de fraguado extremadamente rápido usado para montar modelos y para asegurar los instrumentos gnatológicos en su posición. También puede ser usado como yeso piedra para cuando se necesiten modelos rápidamente.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)



Amarillo Claro

RAPIDFLASK™ ISO TIPO 3

Yeso Fluido para Enmufado

RapidFlask™ es un yeso fluido el cual fluye sin vibración entre todas las áreas de la mufla creando así una reproducción precisa excepcional. RAPIDFLASK es de fraguado rápido y puede estar listo para separar en 20 minutos, permitiendo así múltiples enmufados mejorando así la eficiencia en su laboratorio

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 22 kg (50 lb.)



Yeso Piedra Para modelos



Azul Amarillo Claro

QUICKSTONE LABORATORY STONE ISO TIPO 3

Yeso Piedra Dental Económico

Quickstone is an economical dental stone with consistent handling properties. Its smooth, creamy mix makes it ideal for a variety of lab procedures.

EMPAQUE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)
Cartón de 22 kg (50 lb.)



Golden Blanco

MICROSTONE ISO TIPO 3

Yeso Piedra Dental de Primera

Las finas partículas del Microstone y la superficie densa lo hacen nuestro mejor yeso piedra de laboratorio para toda aplicación. Es especialmente apropiado para el procesamiento de acrílicos.

EMPAQUE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)
Cartón de 22 kg (50 lb.)
Sobres Prepesados
80 Paquetes de 140 g (Sólo Oro)



Blanco

ORTHODONTIC STONE ISO TIPO 3

Yeso Piedra Dental Super Blanco

El yeso paris para ortodoncia, es un yeso piedra dental duro, fiel, exacto de color súper blanco para estética óptima. Su tiempo de trabajo prolongado permite el vaciado de modelos múltiples con una mezcla.

EMPAQUE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)
Cartón de 22 kg (50 lb.)



Amarillo Claro

BUFF STONE ISO TIPO 3

Un yeso piedra tipo 3 económico para uso general en el laboratorio. Buff Stone ofrece un tipo de trabajo extensivo el cual le permite a los técnicos de verter múltiples modelos o bases.

EMPAQUE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)
Cartón de 22 kg (50 lb.)

	Relación Agua Polvo (agua en ml por cada 100 g de polvo)		Tiempo De Mezclado (segundos)		Tiempo De Trabajo (minutos)	Tiempo De Fraguado (minutos)	Expansión (%)	Fuerza Compresiva Mpa (psi)		Color	ISO
			Mezclado Mecánico a 350-450 Rpm	Manual (Mezclado a Mano)				Después De 1 hora (húmedo)	Después De 48 horas (seco)		
YESO PIEDRA PARA ESPECIALIDADES											
SNAP-STONE*	23	0	10-15	60-90 sec.	2	.15	41 (6,000)	97 (14,000)	Rosado	4	
FLOWSTONE FS	22-24	20-30	60-90	2-3	4-6	.08	41 (6,000)	83 (12,000)	Blanco Azul	4	
FLOWSTONE	22-24	20-30	60-90	6-9	12	.08	41 (6,000)	83 (12,000)	Blanco Amarillo Claro Azul Azul Claro Verde Claro	4	
MOUNTING STONE*	26	0	30-45	2-3	5	.08	32 (4,600)	59 (8,500)	Blanco Azul	3	
BITESTONE	29	0	10-15	10-60 sec.	1-3	.15	22 (3,300)	49 (7,000)	Blanco	3	
RAPID FLASK	35	20-30	NA	2-3	5-7	.10	25 (3,500)	52 (7,200)	Amarillo Claro	3	
YESO PIEDRA PARA MODELOS											
QUICKSTONE	28	20-30	60-90	3-5	10	.14	27 (4,000)	55 (8,000)	Amarillo Claro Azul	3	
MICROSTONE	28	20-30	60-90	5-7	13	.12	31 (4,500)	59 (8,500)	Oro Blanco	3	
ORTHODONTIC STONE	28	20-30	60-90	5-7	10	.09	31 (4,500)	59 (8,500)	Blanco	3	
BUFF STONE	30	20-30	60-90	6-8	15	.15	28 (4,000)	56 (8,000)	Amarillo Claro	3	

* Productos Clínicamente comunes

Yeso Paris



Blanco

ORTHODONTIC PLASTER ISO TIPO 2

Yeso París Dental Super Blanco

Desarrollado específicamente para usarse en la ortodoncia, el yeso paris para ortodoncia es más duro y más blanco que el yeso paris común. Tiene un tiempo de trabajo prolongado y se recorta fácilmente.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 9 kg (20 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)



Blanco

LABORATORY PLASTER ISO TIPO 2

Fraguado Normal y Rápido

Es un yeso paris blanco económico formulado para uso general en el laboratorio. Disponible en fraguado normal y fraguado rápido.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 9 kg (20 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)



Blanco

MOUNTING PLASTER ISO TIPO 1

Yeso Piedra, de Baja Expansión y Alta Compresión

Un material de yeso formulado especialmente que ofrece una expansión muy baja y rápido tiempo de fraguado. Sus características de compactación permiten que las placas de montaje se limpien fácilmente.

EMPAQUE

Volumen

Cartón de 9 kg (20 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)

Sobres Prepesados

100 Paquetes de 100 g

	Relación Agua Polvo (agua en ml por cada 100 g de polvo)	Tiempo De Mezclado (segundos)		Tiempo De Trabajo (minutos)	Tiempo De Fraguado (minutos)	Expansión (%)	Fuerza Compresiva Mpa (psi)		Color	ISO
		Mezclado Mecánico a 350-450 Rpm	Manual (Mezclado a Mano)				Después De 1 hora (húmedo)	Después De 48 horas (seco)		
ORTHODONTIC PLASTER	37	20-30	60-90	7-9	14	.20	25 (3,500)	45 (6,500)	Blanco	2
LABORATORY PLASTER Fraguado Normal	45	20-30	60-90	5-7	14	.20	10 (1,500)	23 (3,300)	Blanco	2
LABORATORY PLASTER Fraguado Rápido	45	20-30	60-90	2-4	9	.20	10 (1,500)	23 (3,300)	Blanco	2
MOUNTING PLASTER	63	0	20-30	60-90 sec.	3	.09	4 (640)	12 (1,800)	Blanco	1



Nuevo diseño, nuevo estándar

Presentamos la nueva imagen de nuestros sobres pre pesados con mejoras en su empaque y el diseño del sello. El nuevo diseño supera con creces el empaque anterior en fortaleza y resistencia a la humedad y fugas de aire.

Pulido medio

DAZZLE PS

Sustituto de la Piedra Pómez para Pulir Acrílico

Dazzle PS esta especialmente formulado con abrasivos únicos para cortar y pulir más rápido y más suavemente que la piedra pómez. Y mientras que la piedra pómez mantiene humedad, Dazzle PS seca rápidamente cuando no se esta utilizando, eliminando olores proporcionando un medio ambiente de trabajo mas higiénico. Su polvo de grano fino lo hace más cómodo para las manos cuando se están puliendo dentaduras y aparatos.

EMPAQUE

Volumen
Cartón de 9 kg (20 lb.)



PIEDRA PÓMEZ

La piedra pómez Whip-Mix esta disponible en diferentes grados, desde muy grueso a harina de piedra pómez para satisfacer todos los requerimientos de pulido. La variedad de paquetes de diferentes tamaños ayuda a compensar el costo de la piedra pómez de cambiar con frecuencia el producto entre los casos.

EMPAQUE

Volumen
Paquete de 1.6 kg (3.5 lb.)
Cartón de 9 kg (20 lb.)
Cartón de 22 kg (50 lb.)

PUMICE PREPPIES™

Dosis Única de Pasta de Polvo de Piedra Pómez

La pasta de polvo de piedra pómez Preppies no contiene aceites, sabores o flúor, no deja residuos en la superficie de los dientes y no afecta la fuerza de adhesión. Cada copa de dos gramos proporciona suficiente pasta de piedra pómez para un solo uso, permitiendo un control óptimo contra la infección.

EMPAQUE

100 Tazas de 2 g



Nuestra Reputacion Grabada En Piedra.

Para mejores restauraciones, se necesita una base sólida. Nuestra extensa línea de productos de yesos de calidad se mezcla suavemente, fácil de verter resultando en una superficie suave para modelos exactos de corte fácil.

Además, hemos probado cada lote de yeso para asegurarnos de que nuestros clientes reciban los productos más confiables y consistentes disponibles. Usted puede contar con la consistencia, y precisión del tiempo de fraguado, expansión de fraguado y fuerza en cada lote de yeso Whip Mix que usted compre.



Confíe en Whip Mix como su recurso técnico.

Nuestros representantes de Whip Mix y personal técnico con conocimientos han sido entrenados en el uso de todos nuestros productos. Además nosotros le ayudaremos a seleccionar su equipo, le mostraremos cómo conseguir integración de técnicas y nuevos materiales en su práctica, y proporcionar repuestos y servicios cuando sea necesario.

Visite la pagina de soporte: whipmix.com/technical-support, para:

- Seminarios en internet (webinars) presentados mensualmente y filmados en video para su conveniencia
- Uso y son videos de muchos productos
- Instrucciones de uso de productos
- Esquemáticos
- Identificación de partes
- y más



more reasons. one source

Muestras y promociones
especiales en:
www.whipmix.com

Whip Mix Corporation • 361 Farmington Ave. • Louisville, Kentucky • 40209
800-626-5651 • Phone: 502-637-1451